



КУШЕТКИ VTL

ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ
И ТЕРАПИИ



КУШЕТКИ BTL ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ТЕРАПИИ

Компания BTL предлагает широкий выбор кушеток для реабилитации и обследований — от простых кушеток с фиксированной высотой, до шестисекционных электрически регулируемых моделей. Стандартные параметры кушетки могут быть изменены для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователя.

При разработке кушеток большое внимание уделялось удобству и пациента, и врача. BTL предлагает большой выбор высококачественных цветных покрытий и аксессуаров. Среди особенностей кушеток BTL стоит выделить уникальную прочность и долговечность, высокое качество покрытия и высокомощный бесшумный электропривод. Все кушетки оснащены пневматическим приводом для регулировки головной секции.

Кушетки BTL — это исключительное качество с учетом ваших пожеланий.

Основные характеристики:

- Функциональный дизайн, обеспечивающий высокий уровень безопасности и комфорта
- Универсальность использования
- Надежность и долговечность конструкции
- Отличная устойчивость
- Ручное, пневматическое или электрическое управление
- Мощный и бесшумный электропривод
- Простота в обслуживании
- Невоспламеняющееся покрытие
- Широкая цветовая гамма покрытий
- Большой выбор опциональных принадлежностей: аксессуары для упражнений, выдвижные колеса, держатель санитарной бумаги

СОДЕРЖАНИЕ

Электрически регулируемые кушетки.....	4
Специальные кушетки.....	7
Кушетки Basic Series.....	8
Аксессуары.....	9
Аксессуары для упражнений.....	9
Гинекологические кресла.....	12
Цвета покрытий.....	14

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ КУШЕТКИ


ВТL-1300 ДВУХСЕКЦИОННЫЕ КУШЕТКИ

ВТL-1300 — двухсекционная кушетка, которая подходит для базового оснащения любого медицинского учреждения. Электрический мотор обеспечивает регулировку высоты. Расширенная комплектация модели двухсекционной кушетки с регулируемой спинкой ($0^{\circ}/+20^{\circ}$) подходит для тракционной терапии. Стандартная комплектация кушетки включает в себя пульт управления, пневматический привод для регулировки головной секции и отверстие для лица.



ВТL-1300 ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ КУШЕТКИ

Кроме электрической регулировки высоты, трехсекционная кушетка ВТL-1300 также оснащена электрической регулировкой средней секции. Изогнутая позиция оптимальна для проведения терапии в нижней части спины. Модель расширенной комплектации с отрицательным углом регулировки подходит для положения Тренделенбурга и ручного вытяжения. Стандартная комплектация кушетки включает пульт управления, пневматический привод для регулировки головной секции и отверстие для лица.

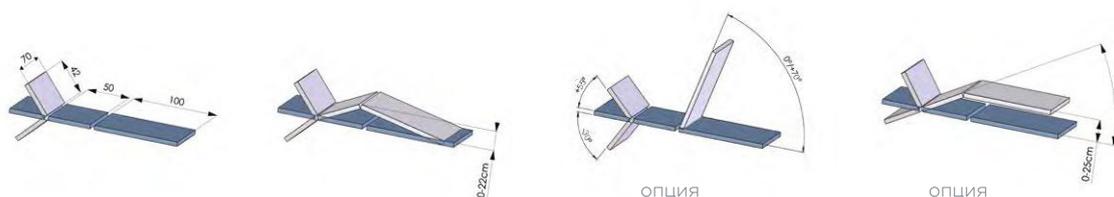


ВТL-1300 ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ КУШЕТКА С РАЗДЕЛЕННОЙ ГОЛОВНОЙ СЕКЦИЕЙ

Этот тип электромоторной кушетки ВТL-1300 состоит из основной секции и трехсекционной головной секции, регулируемой пневматическим клапаном. Позиция подлокотников может изменяться и фиксироваться. В стандартной комплектации кушетка оснащена пультом управления и отверстием для лица.



ВТL-1300 ПЯТИСЕКЦИОННАЯ КУШЕТКА

Пятисекционная кушетка ВТL-1300 оборудована моторизованной регулировкой высоты и положения средней части. Она состоит из трехсекционной головной части с отверстием для лица, средней и ножной секций. Головная часть регулируется пневматическим приводом.

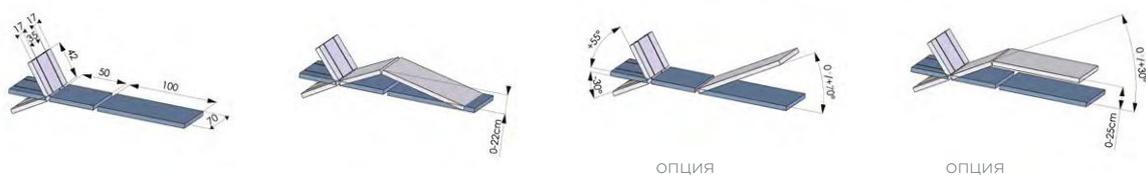

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУШЕТКИ

КУШЕТКА BTL-1300 BOBATH

Кушетка BTL-1300 Bobath разработана для выполнения Бобат-терапии и Войта-терапии. Она обеспечивает достаточно места для врача и пациента. Поставляется с одной и двумя секциями. Стандартные размеры 190×90 см могут быть изменены по желанию клиента.



BTL-1100 ДВУХСЕКЦИОННАЯ КУШЕТКА


Двухсекционная кушетка BTL-1100 с фиксированной высотой и пневматической регулировкой головной секции. Стандартная модель может быть расширена добавлением отверстия для лица в головную секцию. Эта модель компактна и удобна в транспортировке.



КУШЕТКИ BASIC SERIES

ВТL-1300 BASIC ДВУХСЕКЦИОННАЯ КУШЕТКА

Кушетки серии ВТL-1300 Basic имеют привлекательную стоимость для электромоторных кушеток подобного рода, но, вместе с тем, обладают устойчивостью и прочностью конструкции. Головная секция регулируется пневматическим приводом. Стандартная модель может быть модернизирована отверстием для лица, выдвижными колесами и ножным переключателем высоты.

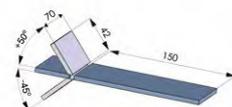



ВТL-1300 BASIC ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КУШЕТКА

Экономичная модель с гидравлической регулировкой высоты.



ВТL-1300 BASIC ТРЕХСЕКЦИОННАЯ КУШЕТКА

В отличие от двухсекционной версии, эта кушетка поставляется с разделенной основной частью. Она оборудована вторым электрическим мотором для управления средней частью. Стандартная модель может быть модернизирована отверстием для лица, выдвижными колесами, ножным переключателем высоты и пневмоприводом для регулировки секций.

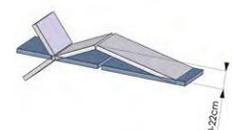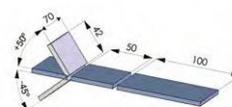

АКСЕССУАРЫ



Отверстие для лица



Пневматическая
регулировка головной
секции



Держатель
санитарной бумаги



Выдвижные колеса /
Ножной переключатель



Выдвижные колеса
(по периметру кушетки
для моделей BTL-1300 Basic)



Пульт управления

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ



Клин 40 x 40 x 12 см



Цилиндр 60 x ø18



Клин 40 x 40 x 20 см



Куб 45 x 45 x 45 см



Полуцилиндр 60 x 18 x ø9

КУШЕТКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ



Модель	BTL-1300	BTL-1300	BTL-1300	BTL-1300	BTL-1300
--------	----------	----------	----------	----------	----------

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	2 секции	3 секции	4 секции с разделенной головной секцией	5 секций	6 секций
	1 мотор	2 мотора	1 мотор	2 мотора	2 мотора
Номер заказа	T013.000	T013.003	T013.023	T013.004	T013.022
Электрическая регулировка высоты	•	•	•	•	•
Электрическая регулировка средней секции		•		•	•
Пульт управления	•	•	•	•	•
Пневматическая регулировка секции для головы (секции для спины для BTL-1300 Bobath)	•	•	•	•	•
Стандартная ширина (см)	70	70	70	70	70
Передвижная секция для ног: 15 см					
Рамка					

АКСЕССУАРЫ

Головная секция (с отверстием для лица)	•	•	•	•	•
Подушка с отверстием для лица	○	○	○	○	○
Выдвижные колеса	○	○	○	○	○
Выдвижные колеса для BTL-1300 Basic					
Ножной переключатель для регулировки высоты	○	○	○	○	○
Рамка по периметру кушетки для регулировки высоты	○	○	○	○	○
Рамка по периметру кушетки для регулировки высоты BTL-1300 Basic					
Увеличенная ширина: 80 см	○				
Увеличенная ширина кушетки Bobath (120 см)					
Пневмопружина для головной секции (для BTL-1300)		○		○	•
Кнопка пациента	○	○	○	○	○
Держатель для санитарной бумаги	○	○	○	○	○
Стул с регулируемой высотой					

• - стандарт, ○ - опция

КУШЕТКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ			ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ		С ФИКС. ВЫСОТОЙ
					
BTL-1300	BTL-1300	BTL-1300	BTL-1300	BTL-1300	BTL-1100
Bobath 1 секция и 2 секции	Basic 2 секции	Basic 2 секции	Trac 2 секции	Basic 2 секции	2 секции
1 мотор	1 мотор	2 мотора	1 мотор	гидравлическая кушетка	фиксированная высота
T013.005 (1 сек.) T013.012 (2 сек.)	T013.013	T013.018	T013.011	T013.030	T011.160
•	•	•	•	механическая регулировка	
		•			
•	•	•	•		
• 2 секции	•	•	•	•	•
90	70	70	70	70	70 / 70 (высота)
			•		
					•
	○	○	•	○	○
○	○	○	○	○	○
○			○		
	○	○		○	
○	○	○	○		
○			○		
	○	○			
○					
○	○	○	○		
	○	○	○	○	•
			○		

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

ВТL-1500 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

Гинекологические кресла ВТL-1500 разработаны для всех типов гинекологических практик. Их прочная и элегантная конструкция обеспечивает максимальную устойчивость. Кресла изготавливаются в нескольких вариантах: стационарное кресло и кресло с одним, двумя или тремя моторами с тихой и ровной работой. Все изменения позиций могут быть выполнены при максимальной весовой нагрузке. Доступен широкий ассортимент аксессуаров и цвета покрытия.

Модели:

- ВТL-1500 Basic — фиксированная высота (80 см), фиксированные спинка и сиденье / Номер заказа T015.018
- ВТL-1500 с 1 мотором — электрическая регулировка высоты, фиксированные спинка и сиденье / Номер заказа T015.001
- ВТL-1500 с 2 моторами — электрическая регулировка высоты, электрическая регулировка спинки и фиксированное сиденье / Номер заказа T015.002
- ВТL-1500 с 3 моторами — электрическая регулировка высоты, спинки и сиденья / Номер заказа T015.003
- ВТL-1500 с 3 моторами и программированием — электрическая регулировка высоты, спинки и сиденья, 3 заданные программы пользователя для часто используемых позиций / Номер заказа T015.011



Диапазон регулировки сиденья и спинки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АКСЕССУАРЫ

Технические характеристики кресел BTL-1500

Регулировка высоты	80–100 см
Стандартная ширина	60 см
Длина спинки	90 см
Длина сиденья	40 см
Стандартный угол наклона спинки	30°
Регулировка спинки	+5°/+50°
Стандартный угол наклона сиденья	0°
Регулировка сиденья	+0°/+45°
Максимальная нагрузка	180кг
Вес	68 кг
Питание от сети	230 В / 50–60 Гц

Кресло BTL-1500 может быть оборудовано специальной урологической приставкой с креплением к ножной секции. Урологическая приставка / Номер заказа T015.017



Стандартные и опциональные аксессуары для кресел BTL-1500

Стандартные аксессуары	пульт управления, упоры для рук, емкость из нержавеющей стали, держатель для санитарной бумаги
Опциональные аксессуары	держатели под пятки / номер заказа T015.019 держатели для ног / номер заказа T015.008 ножная педаль для BTL-1500 с 1 мотором / номер заказа T015.005 ножная педаль для BTL-1500 с 2 моторами / номер заказа T0 5.006 держатель для санитарной бумаги / номер заказа T015.014 держатель для кольпоскопа / номер заказа T015.013 лампа / номер заказа T015.012 подголовник / номер заказа T015.007 выдвижные колеса / номер заказа T015.004 встроенная ступенька / номер заказа T015.010 съемная ступенька / номер заказа T015.009 высококачественные покрытия (см. стр. 14)

ЦВЕТА ПОКРЫТИЙ



Белый
T010.030




Серо-голубой
T010.039




Синий
T010.041



Ванильный
T010.048

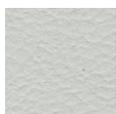

Серый
T010.031

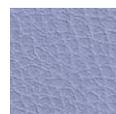

Голубой
T010.040



Темно-синий
T010.049



Оранжевый
T010.034



Желтый
(шафрановый)
T010.033



Бордовый
T010.036



Салатовый
T010.045



Светло-зеленый
T010.037



Красный
T010.035



Бежевый
T010.032



Темно-зеленый
T010.038