

БЭБИГАРД-1153

ТРАНСПОРТНЫЙ ИНКУБАТОР ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ



DIXION

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРИ- И МЕЖБОЛЬНИЧНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ НОВОРОЖДЁННЫХ

Мы продумали каждую деталь, чтобы обеспечить максимальный комфорт для пациента и врача, а также высокий уровень безопасности и функциональность, необходимую для эффективной и надёжной работы в критических условиях.

- ❖ **Системы сервоконтроля** по температуре тела новорождённого и температуре внутри инкубатора
- ❖ **Встроенный аккумулятор** со временем **автономной работы до 6 часов**
- ❖ **Сервоконтроль кислорода и влажности** внутри кювета
- ❖ **Модуль мониторинга** с датчиками Masimo для контроля SpO₂ и показателей гемоглобина
- ❖ **Лёгкая и компактная конструкция** — масса основного модуля всего 25 кг, что существенно облегчает мобильность инкубатора
- ❖ **Уникальный матрасик в форме «гнездышка»** идеально адаптирован к анатомическим особенностям тяжелобольных новорождённых, надёжно фиксирует и снижает риск травм при перемещении, особенно в условиях интенсивной тряски
- ❖ **2 варианта управления системой:** с цветного сенсорного LCD-дисплея 5,6" или с помощью multifunctional колёсика-контроллера

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕЛЕЖЕК

Для любых сценариев транспортировки и требований медучреждений.



❖ **Внутрибольничная тележка**




❖ **Тележка для машин СМП**




❖ **Тележка с платформой для установки дополнительного оборудования**

БЕЗУПРЕЧНАЯ ПРОРАБОТКА КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Внешний увлажнитель создает мелкодисперсный водяной туман с помощью УЗ высокочастотных колебаний, что позволяет быстро достичь оптимального для новорождённого уровня влажности

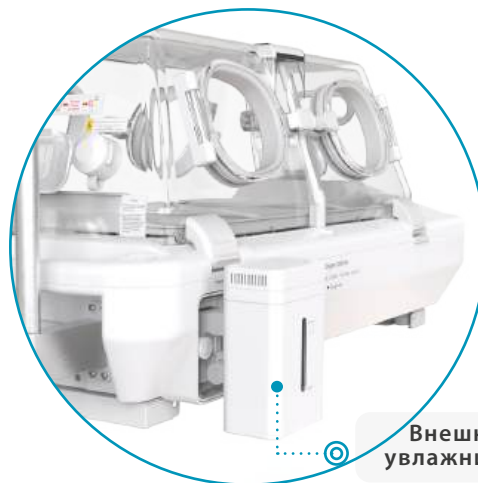


Внешний увлажнитель

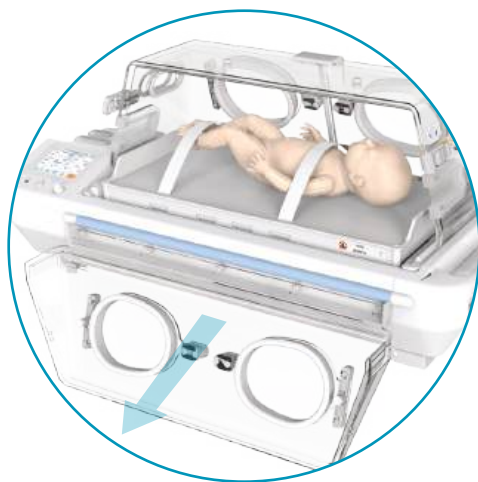


Облегченная конструкция ложа со встроенными направляющими позволяет легко выдвигать и задвигать кровать.

Центральный фиксатор предотвращает опрокидывания ложа даже при сильной тряске

4 силиконовые опоры под ложем эффективно компенсируют вибрации и удары при транспортировке по неровной поверхности, повышая устойчивость системы и снижая риск травм у малыша

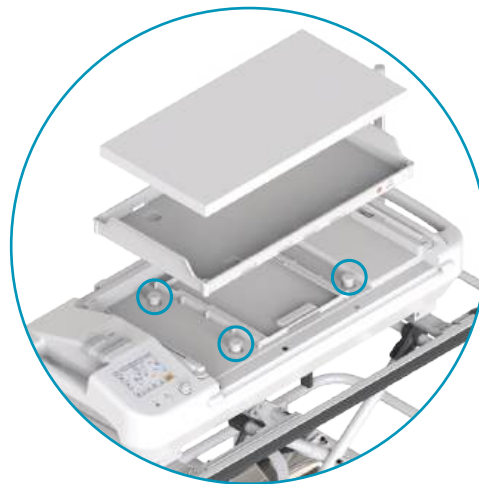

Купол с двойными стенками минимизирует потери тепла при транспортировке, а **система демпфирования панелей** позволяет передней дверце опускаться плавно и бесшумно, без необходимости поддерживать её руками

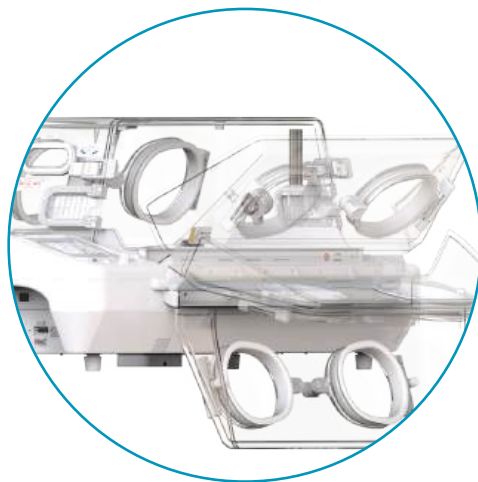

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЭБИГАРД-1153

Сервоконтроль температуры	по воздуху по коже
Сервоконтроль концентрации кислорода	○
Сервоконтроль влажности	○
Модуль мониторинга SpO ₂	○
Модуль мониторинга гемоглобина	○
Управление	дисплей 5,6 колесико-контроллер
Купол с двойными стенками	●
Функция > 37°C	●
Время автономной работы до 3 ч (1 аккумулятор)	●
Время автономной работы до 6 ч (2 аккумулятора)	○
Система плавного опускания стенок	●
Укладка «гнездышко»	○
Стойка для крепления дополнительного оборудования	●
Защитное покрывало	○
Варианты тележек:	
Внутрибольничная тележка	●
Тележка для машин СМП	○
Тележка с платформой для дополнительного оборудования	○

○ — опция



Телефоны: +7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

E-mail: neonatal@stormoff.com, info@dixon.ru, www.dixon.ru