

DIXION

АКУШЕРСКИЕ КРОВАТИ



DIXION

DIXION DH-C101A07 — самая технологичная и функциональная модель в линейке акушерских кроватей DIXION, оснащенная пятью электроприводами для точной и удобной регулировки всех основных положений. Модель разработана для родильных домов и перинатальных центров, ориентированных на современные стандарты ведения родов и концепцию семейно-ориентированной акушерской помощи.

Кровать предназначена для использования на всех этапах — от активной фазы родов до раннего послеродового периода, обеспечивая высокий уровень безопасности, клинической эффективности и максимальный комфорт пациентки, соответствующий оснащению **родильных залов премиального уровня**.



ПОЧЕМУ ВАШ ВЫБОР — ЭТО DIXION DH-C101A07

- ❖ Полный спектр родовых позиций
- ❖ Электрическая система регулировок премиального уровня
- ❖ Высокая автономность и безопасность
- ❖ Продуманная эргономика для персонала
- ❖ Соответствие концепции интегрированного родильного зала полного цикла (LDR-палаты, семейные роды)

DIXION DH-C101A07 — это не просто акушерская кровать, а комплексное решение для родильного отделения высокого класса. Выбор этой модели — это инвестиция в клиническую эффективность, безопасность пациенток и статус медицинского учреждения.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Кровать оснащена 5 электромоторами, обеспечивающими регулировку: высоты ложа, спинной секции, тазовой секции, подлокотников, положения «Тренделенбург»
- ❖ Родовая дуга с 3 уровнями высоты — надежная опора во время потуг для пациенток разного роста
- ❖ Многофункциональная платформа для ног — поднимается, складывается и убирается под тазовую секцию, расширяя доступ к операционному полю
- ❖ Подлокотники регулируются по высоте и при необходимости опускаются на одну линию с ложем
- ❖ Сверхнизкая минимальная высота ложа для комфортного размещения пациентки
- ❖ Функция быстрого перевода кровати в положение для сердечно-легочной реанимации (CPR)
- ❖ Встроенный аккумулятор для автономной работы
- ❖ Ночное освещение в основании кровати
- ❖ Матрас со съемным водонепроницаемым покрытием, съемные изголовье и ножная секция — поверхности легко очищаются и соответствуют требованиям современных стандартов инфекционного контроля



Панель управления
на боковом ограждении




Рычаг для перевода
кровати в положение CPR



Вспомогательная подушка
для головы

ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КРОВАТИ

Положение для проведения сердечно-легочной реанимации (CPR)

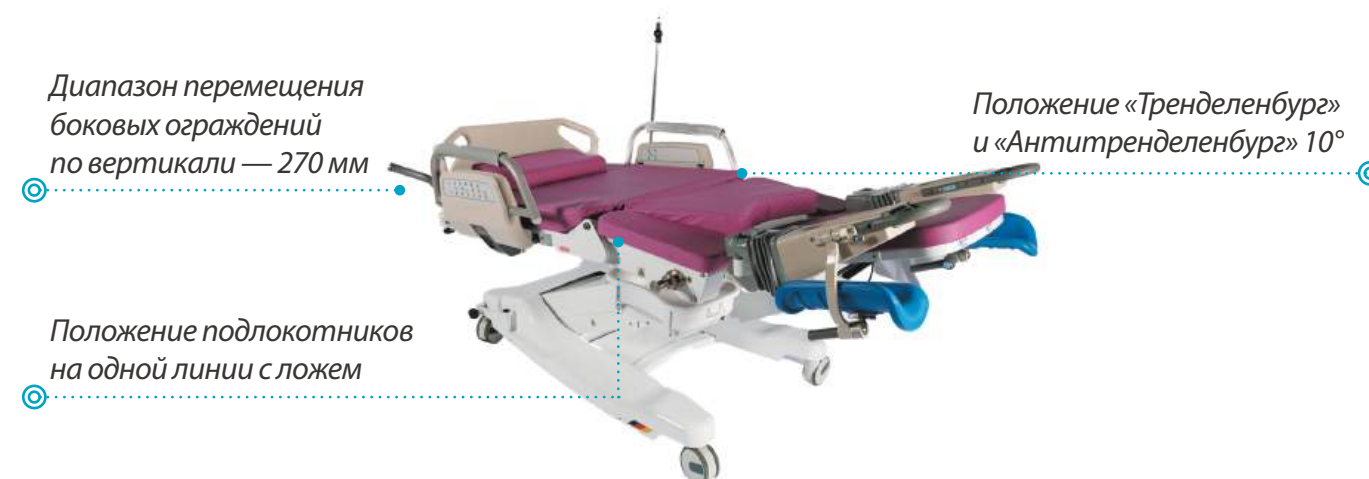

Положение «кресло» с поднятой платформой для ног



Положение «кровать» с подколенными опорами по Геппелю



Многофункциональная акушерская кровать с пятью электроприводами разработана с учетом современной концепции семейно-ориентированного родовспоможения и формирует **пространство комфорта, уверенности и доверия в родзале**. Модель предназначена для родильных залов с повышенными требованиями к функциональности и эргономике. Усиленная конструкция, интеллектуальная система управления и увеличенная ширина ложа обеспечивают **высокий уровень комфорта, устойчивости и клинической надежности** как для пациентки, так и для медицинского персонала.

Широкое ложе делает модель особенно комфортной для пациенток с различной комплекцией и позволяет свободно использовать весь спектр физиологических положений во время родов, что соответствует уровню оснащения **современных перинатальных центров**.

Съемное изголовье кровати

Универсальное широкое ложе

Панель управления положениями кровати

Емкость для отходов

Центральная тормозная система

Электрически регулируемая родовая дуга

Изоляционный матрас для спины и таза

Держатели для ног по Геппелю и опоры для стоп

Ножная секция с электрической регулировкой высоты, задвигается под тазовую секцию

СИМВОЛ РОДИЛЬНОГО ЗАЛА ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ

Модель разработана для перинатальных центров и родильных отделений, где ключевыми приоритетами являются безопасность, физиологичность родового процесса и высокий уровень оснащения. Продуманная конструкция и современные механизмы регулировки обеспечивают комфорт пациентки и эффективную работу медицинского персонала. Сочетание функциональности, эргономики и технологических решений делает модель оптимальным выбором для оснащения родильных залов, подчеркивая статус отделения высокого уровня.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Кровать оснащена 5 электромоторами, обеспечивающими регулировку: высоты ложа, спинной секции, тазовой секции, платформы для ног и положения родовой дуги
- ❖ Универсальные опоры для ног по Геппелю — регулируются под любым углом, обеспечивая анатомически правильную фиксацию и поддержку. При необходимости могут выполнять функцию подлокотников и легко снимаются
- ❖ Родовая дуга обеспечивает надежную опору во время потуг и способствует участию женщины в родовом процессе
- ❖ Съемное изголовье и платформа для ног — удобство трансформации под разные клинические сценарии
- ❖ Высота платформы для ног регулируется электрически, платформа поворачивается на 90° в обе стороны и может быть размещена под тазовой секцией — обеспечивая врачу свободный доступ к операционному полю
- ❖ Увеличенная ширина ложа — 1200 мм
- ❖ Центральная тормозная система гарантирует стабильность конструкции во время родов и манипуляций
- ❖ Встроенный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу при отключении электроэнергии; предусмотрена световая и звуковая индикация



Панель управления на внешней стороне боковых ограждений



Родовая дуга с мягким дезинфицируемым чехлом



Регулируемая платформа для ног

ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КРОВАТИ

Положение для позы на коленях с опорой на родовую дугу

Диапазон регулировки
опорной дуги для родов
150 мм



Диапазон регулировки
платформы для ног 155 мм



Положение «кресло» в максимальном положении по высоте

Поворот тазовой секции
вверх на 19°



Отклонение платформы
для ног вправо и влево на 90°



Положение с поднятой тазовой секцией и опущенными боковыми ограждениями

Регулировка бокового
ограждения в диапазоне
410 мм



Наклон спинной секции
от (-12°) до 55°



DIXION DH-C101A06, DIXION DH-C101A08

Акушерские кровати **DIXION DH-C101A06 / DH-C101A08** — **многофункциональные модели среднего класса**, разработанные для оснащения современных родильных залов с повышенными требованиями к удобству и надежности оборудования. Электрическая регулировка высоты, спинной и ножной секций обеспечивают комфорт пациентки и удобство работы медицинского персонала на всех этапах родов.


Модель **DIXION DH-C101A08** представляет собой улучшенную версию **DIXION DH-C101A06** с расширенными возможностями регулировки и повышенной эргономикой, обеспечивающей более высокий уровень комфорта и клинической функциональности.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Матрас с эффектом памяти и бесшовный влагонепроницаемый чехол — поддержка, комфорт, устойчивость к износу и простота ухода
- ❖ Независимая регулировка каждого держателя для ног по Геппелю. Два настраиваемых упора для ступней на каждом держателе
- ❖ Положение «Тренделенбурга» настраивается с помощью ручки управления наклоном, расположенной в изголовье кровати: кровать фиксируется в наклоне под любым углом из диапазона «Тренделенбурга»
- ❖ Емкость для отходов объемом 12 л
- ❖ Источник ночного освещения с регулировкой яркости можно включить ночью на длительное время, не тревожа пациента
- ❖ Съемная панель изголовья и регулируемые по вертикальной оси боковые ограждения — удобство партнерских родов
- ❖ Панели управления для персонала и пациентки с обеих сторон кровати
- ❖ Интегрированная ножная педаль — регулировка высоты без использования рук (модель Dixon DH-C101A08)
- ❖ Bluetooth-подключение для дистанционного изменения положения кровати (модель Dixon DH-C101A08)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

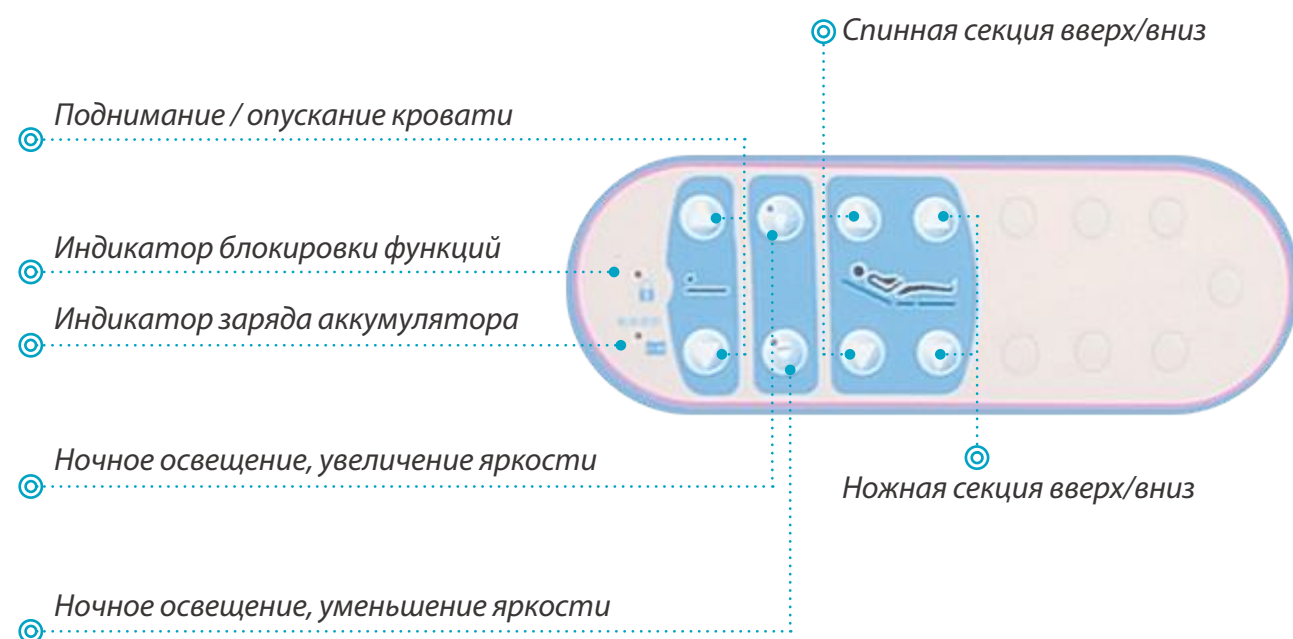

ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КРОВАТИ

Положение «кресло» с упорами для ступней и поручнями для рук




Положение «кресло» с подколенными опорами по Геппелю и вспомогательным столиком



Прямое положение «кровать»



Надежная и функциональная акушерская кровать базового уровня с электрическими регулировками и съемной ножной секцией, обеспечивающей свободный доступ к роженице и новорожденному. Оптимальное решение для оснащения родильных залов, **сочетающее удобство, безопасность и доступную стоимость.**

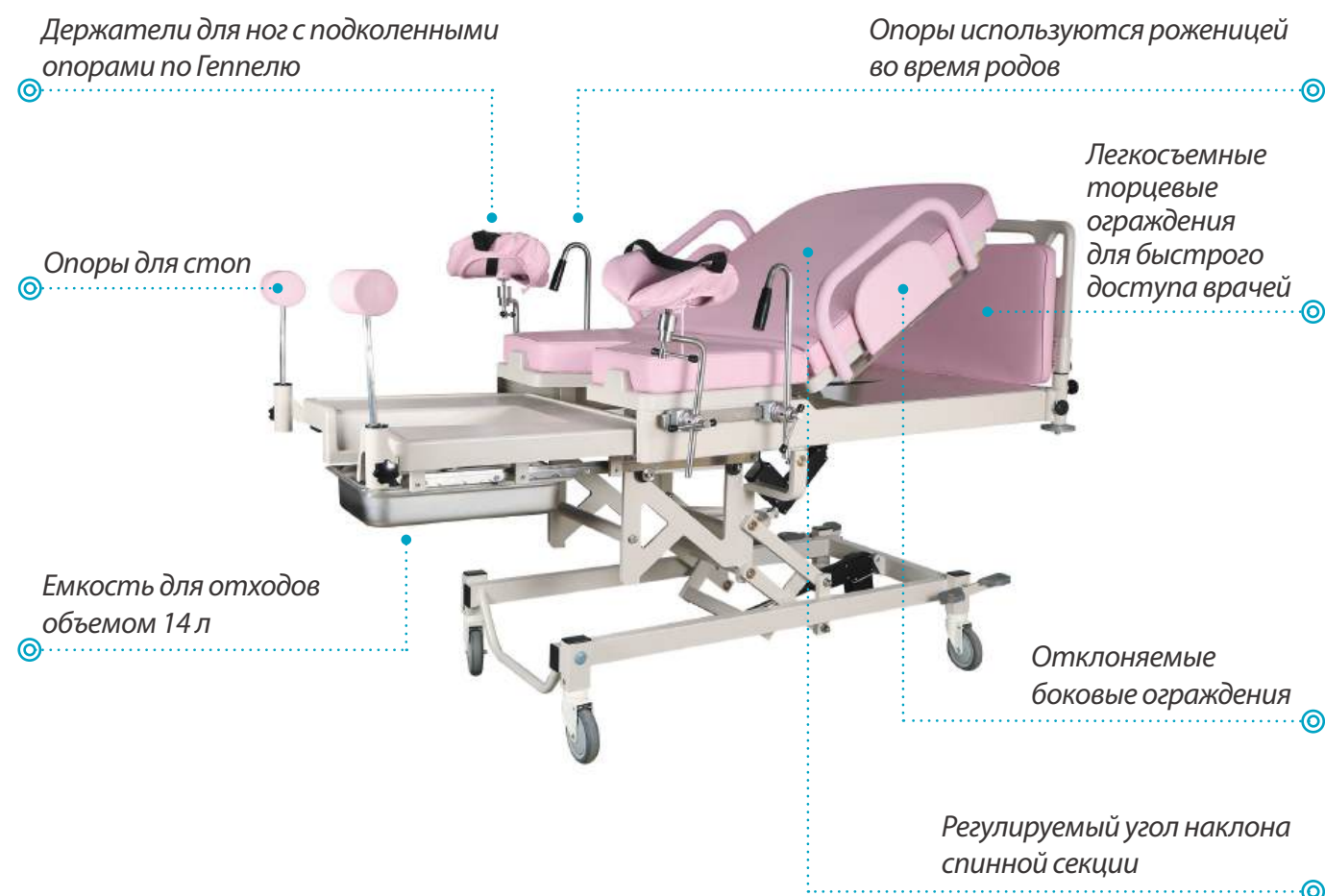


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Ультралегкая ножная секция с безопасной нагрузкой 50 кг, может быть расположена под ложем
- ❖ 3 электропривода, обеспечивающие регулировку: высоты ложа, угла наклона спинной секции, положений «Тренделенбург» и «Антитренделенбург»
- ❖ Ручной пульт дистанционного управления
- ❖ Ножной пульт дистанционного управления (опционально)

ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КРОВАТИ

Прямое положение «кровать»

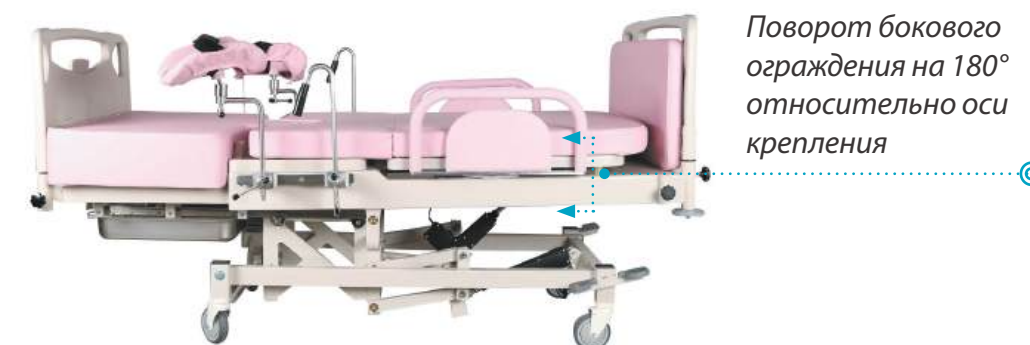

Положение «кресло» с упорами для ступней



Положение «Тренделенбург»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	A02	A05	A06	A07	A08
Количество секций	3	3	3	3	3
Количество электроприводов	3	5	3	5	3
Электрическая регулировка:					
Высоты ложа	•	•	•	•	•
Спинной секции	•	•	•	•	•
Тазовой секции		•		•	
Подлокотников				•	
Положения «Тренделенбург»	•			•	
Положения «Антитренделенбург»	•				
Платформы для ног/ножной секции		•	•		•
Родовой дуги		•			
Ручная регулировка:					
Платформы для ног/ножной секции				•	
Родовой дуги				•	
Упоров для ног по Геппелю	•	•	•	•	•
Боковых ограждений	•	•	•	•	•
Функционал:					
Положение «Тренделенбург»	•		•	•	•
Положение «Антитренделенбург»	•			•	
Положение для сердечно-легочной реанимации (CPR)			•	•	•
Увеличенная ширина ложа		•			
Сверхнизкая минимальная высота кровати				•	
Центральная тормозная система		•	•	•	•
Аккумулятор для автономной работы		•	•	•	•
Ночное освещение			•	•	•
Воспроизведение музыки			•	•	•
Комплектация:					
Ручной пульт управления	•				
Ножной пульт управления	○				•
Панель управления на боковом ограждении		•	•	•	•
Упоры для ног по Геппелю	•	•	•	•	•
Подлокотники				•	
Упоры для рук	•		•	•	•
Вспомогательный столик	•		•		•
Родовая дуга		•		•	
Емкость для отходов	•	•	•	•	•
Инфузионная стойка	•		•	•	•
Подушка для головы				•	
Изоляционный матрас для спины и таза		•			
Гелевый матрас					○

○ — опция



Телефоны: +7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: info@dixon.ru, www.dixon.ru