

DIXION


ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ

Фетальные мониторы: Овертон 6200 • 6900

Фетальный доплер: Овертон 6000

Станция центрального мониторинга

Дополнительные принадлежности

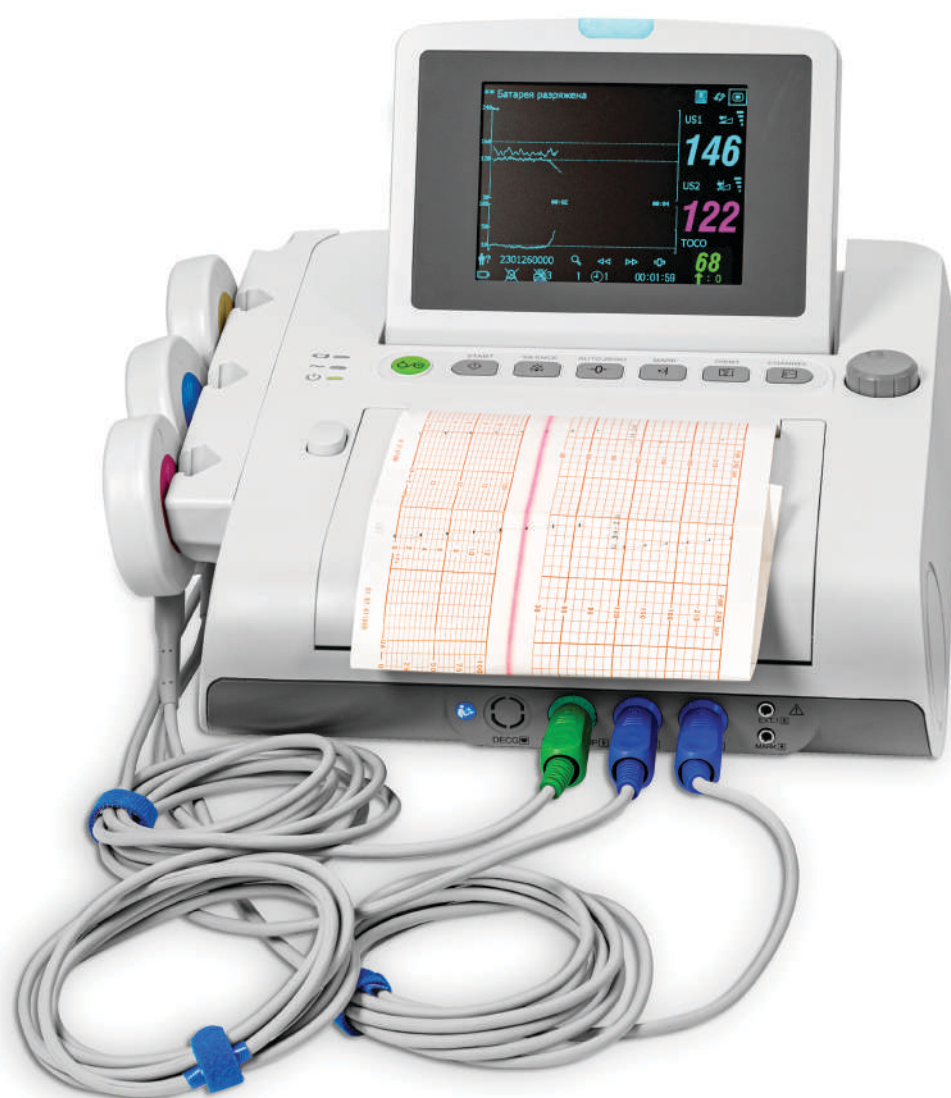

DIXION

ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР ОВЕРТОН 6900

Фетальные мониторы DIXION Овертон предназначены для слежения за состоянием матери и плода. Расширенные функциональные возможности позволяют использовать мониторы в дородовой диагностике, во время родов, и по окончании родов, если требуется наблюдение за состоянием матери. Исключительная информативность, эргономичность и легкость в работе делают мониторы DIXION доступными для использования персоналом любого уровня подготовки.

Звуковой и световой сигналы тревоги с настраиваемыми границами диапазона сигнала

Вывод на экран числовых значений и графиков в реальном времени

Сенсорный цветной ЖК-дисплей диагональю 12,1" с регулируемым углом наклона

Крепление датчиков на корпусе аппарата

Быстрая печать КТГ из архива (25 мм/мин) без изменения развертки

Кнопка «быстрый старт» может быть настроена на ввод данных пациента и печать, ускоряя работу врача

Удаленный маркер событий

DIXION

ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР ОВЕРТОН 6900

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Формирование кривой по принципу «от удара к удару»
- ❖ Возможность проведения анализа на экране с метками и стандартными заключениями, вывод данной информации на печать
- ❖ Воспроизведение КТГ в режиме реального времени
- ❖ При сбое электричества прибор запоминает последние 24 записи КТГ, в не зависимости от количества пациентов, переключается на работу от аккумулятора
- ❖ Звуковой и световой сигналы тревоги с настраиваемыми границами диапазона сигнала
- ❖ Автоопределение датчиков
- ❖ 12-ти кристальные водонепроницаемые УЗ-датчики
- ❖ Влагозащищенный ТОСО-датчик
- ❖ Сигнал предупреждения при наведении двух датчиков на 1 плод
- ❖ Возможность установки на столе или закрепления на стене
- ❖ Ручной маркер движений плода, автоматическое фиксирование движений плода
- ❖ Автоматический анализ КТГ: потери сигнала в %, схватки, акцелерации, децелерации, STV, LTV, время начала и окончания обследования

КОМПЛЕКТАЦИИ

Параметры	6900-01	6900-02	6900-03	6900-04
ЧСС плода, 2 канала	•	•	•	•
Токотонометрия	•	•	•	•
Маркер движений плода	•	•	•	•
Прямое ЭКГ плода			•	•
Внутриматочное давление			•	•
ЭКГ матери		•		•
Неинвазивное давление матери		•		•
SpO2 матери		•		•
Температура		•		•
Сенсорный экран	•	•	•	•
Фетальный стимулятор	o	o	o	o

o - опция

12-КРИСТАЛЬНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ДАТЧИК ЧСС ПЛОДА

Глубина

40 мм
80 мм
120 мм

7 кристаллов 9 кристаллов 12 кристаллов



Превосходное качество сигнала обеспечивается большей глубиной проникновения луча и однородностью сигнала, а также лучшим пространственным разрешением, чем у традиционных датчиков с меньшим количеством пьезоэлементов.

ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР ОВЕРТОН 6200

Удобное крепление датчиков на корпусе аппарата

Влагозащищенный ТОСО-датчик



Кнопка «быстрый старт» позволяет незамедлительно приступить к работе

Цветной откидной монитор диагональю 5,6"

Высокочувствительные, водонепроницаемые УЗ-датчики

Универсальная бумага шириной 150 мм - 152 мм

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

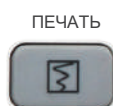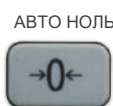

Функциональные кнопки и вращающееся колесико упрощают рабочий процесс, позволяя врачу устанавливать необходимую программу меньшим количеством нажатий.

ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР ОВЕРТОН 6200

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- ❖ 3 режима работы экрана: режим трендов на полный экран, режим крупных цифр, режим одновременного отображения графических и цифровых параметров
- ❖ Программа автоматического анализа результатов с выводом на экран
- ❖ Анализ КТГ: LTV, STV, время начала и окончания измерения
- ❖ Бальная оценка по Фишеру
- ❖ Проведение прямого ЭКГ плода (DECG) и внутриматочного давления (IUP) (Опция)
- ❖ Сигнал предупреждения при наведении двух УЗ-датчиков на 1 плод (Овертон 6200-02)
- ❖ Цветовая дифференциация назначения датчиков
- ❖ При сбое электричества прибор запоминает последние 12 записей КТГ и переключается на работу от аккумулятора
- ❖ Программное обеспечение для передачи данных на ПК в стандартном комплекте
- ❖ Передача данных на ПК в режиме реального времени
- ❖ Встроенное программное обеспечение для соединения с центральной станцией
- ❖ Li-ion аккумулятор

КОМПЛЕКТАЦИИ

Параметры	6200-00	6200-01	6200-02	6200-03	6200-04
Цветной ЖК дисплей		•	•	•	•
Монохромный ЖК дисплей	•				
ЧСС плода, 1 канал	•	•	•	•	•
ЧСС плода, 2 канала	•		•		•
Токотонометрия	•	•	•	•	•
Маркер движений плода	•	•	•	•	•
Прямое ЭКГ плода				•	•
Внутриматочное давление				•	•

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ

- ❖ Совместим со всеми фетальными мониторами Dixon
- ❖ Подключение к ЦС до 128 мониторов
- ❖ Удаленный мониторинг через клиент CNS
- ❖ Центральная станция с «обратным ответом»
- ❖ Встроенная функция анализа КТГ
- ❖ Емкость базы данных: 100 000 записей о пациентах и хранилище тревог, графики КТГ 24 часа для каждого пациента, 1440 записей по показателям жизненно важных функций
- ❖ Wi-Fi соединение
- ❖ Экспорт отчета в формате PDF и JPG

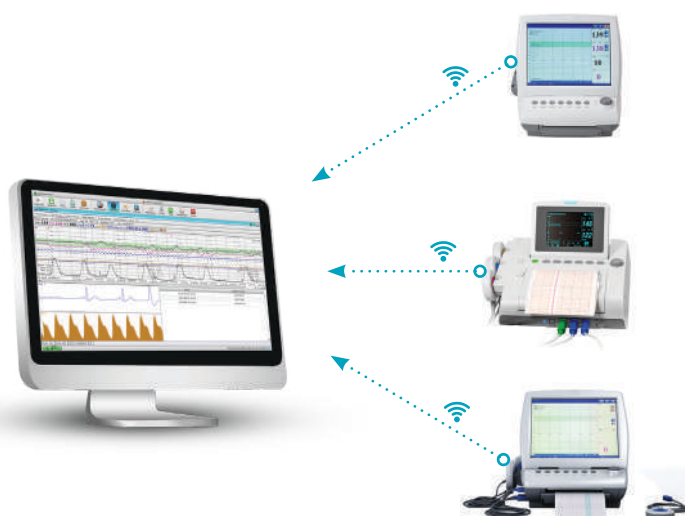

ФЕТАЛЬНЫЙ ДОППЛЕР ОВЕРТОН 6000

Допплеровский анализатор сердечно-сосудистой деятельности матери и плода предназначен для определения частоты сердечных сокращений плода в женских консультациях, а также для самостоятельного использования будущими мамами.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Удобная эргономичная форма и легкость в использовании
- ❖ Измерение сердцебиения плода в трех режимах: реального времени, усредненном или ручном режиме
- ❖ Аудио выход для соединения прибора с наушниками или ПК для записи ЧСС
- ❖ Работа от батарейки или аккумулятора
- ❖ Точная регистрация сердцебиений плода и отображение результата на жидкокристаллическом дисплее

КОМПЛЕКТАЦИИ

Параметры	6000-02	6000-05
Сменный УЗ-датчик	•	•
Аккумулятор и зарядное устройство	батарейки	•
Подсветка экрана		•
Возможность использования с 10-ой недели беременности	•	•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ФЕТАЛЬНЫЙ СТИМУЛЯТОР



Устройство подает легкую вибрирующую стимуляцию через брюшную стенку матери на плод, когда тот спит, тем самым сокращая время, необходимое для нестрессового теста.

СУМКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ФЕТАЛЬНЫХ МОНИТОРОВ



Сумка для Овертон 6900



Сумка для Овертон 6200



Сумка для Овертон 6000

СТОЙКИ ДЛЯ ФЕТАЛЬНЫХ МОНИТОРОВ



- ❖ Стойки со специальным креплением прибора и полкой для ноутбука, на 5 колесах с тормозами, с корзиной (для Овертон 6900)
- ❖ Удобные и эргономичные стойки на 4-х крупных колесах с тормозами, выдвижные ящики для датчиков и бумаги (для Овертон 6900)
- ❖ Стойки с корзинами для размещения бумаги, датчиков и дополнительных принадлежностей, с регулировкой высоты и наклона платформы, на которую крепится монитор



Телефоны: **+7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95** (звонок бесплатный)

e-mail: info@dixon.ru, www.dixon.ru