

# DIXION


ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ

Фетальные мониторы: Овертон 6200 • 6900

Фетальный допплер: Овертон 6000

Станция центрального мониторирования

Дополнительные принадлежности

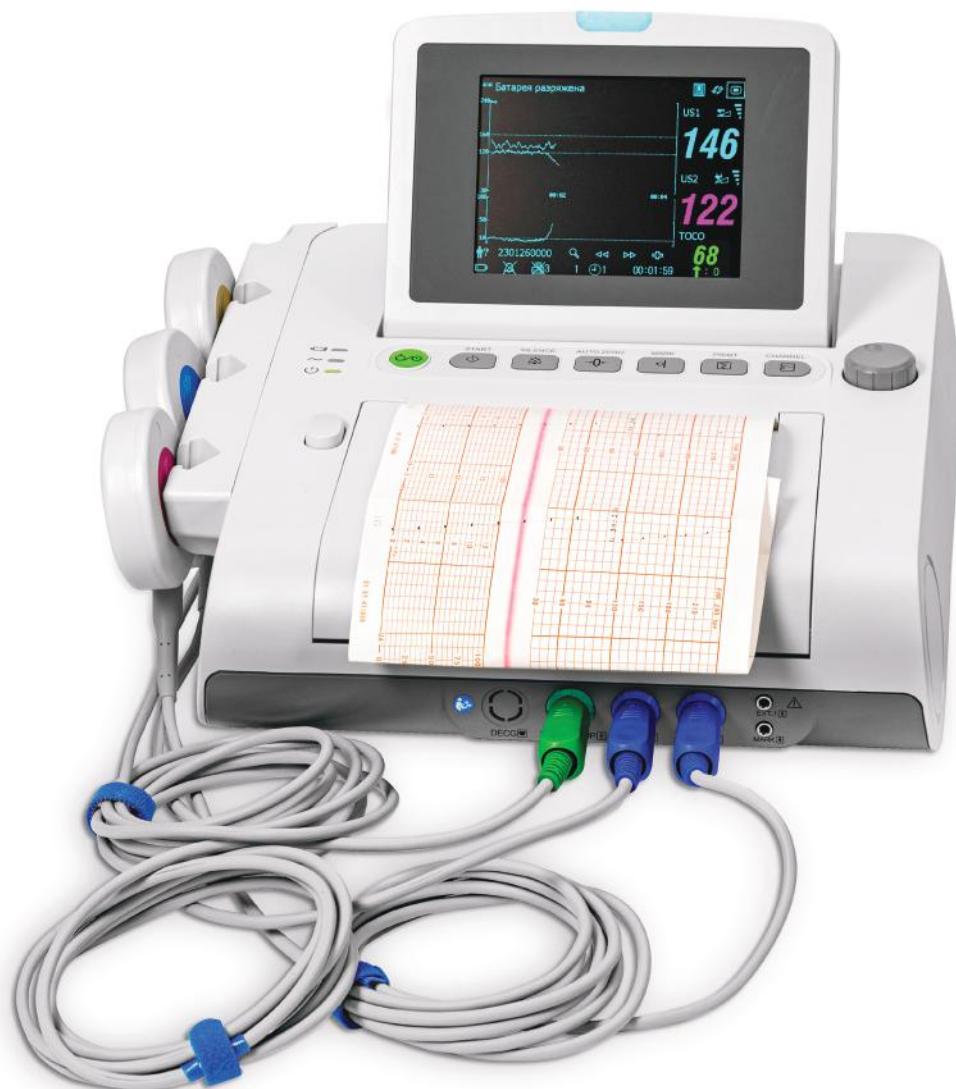

**DIXION**

# ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР ОВЕРТОН 6900

Фетальные мониторы DIXION Овертон предназначены для слежения за состоянием матери и плода. Расширенные функциональные возможности позволяют использовать мониторы в дородовой диагностике, во время родов, и по окончании родов, если требуется наблюдение за состоянием матери. Исключительная информативность, эргономичность и легкость в работе делают мониторы DIXION доступными для использования персоналом любого уровня подготовки.

Звуковой и световой сигналы  
тревоги с настраиваемыми  
границами диапазона сигнала

Вывод на экран числовых  
значений и графиков в  
реальном времени

Сенсорный цветной  
ЖК-дисплей диагональю  
12,1" с регулируемым  
углом наклона

Крепление датчиков  
на корпусе аппарата

Быстрая печать КТГ  
из архива (25 мм/мин)  
без изменения  
развертки

Кнопка «быстрый старт»  
может быть настроена  
на ввод данных пациента  
и печать, ускоряя  
работу врача

Удаленный  
маркер событий

**DIXION**

# ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР ОВЕРТОН 6900

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- ❖ Формирование кривой по принципу «от удара к удару»
- ❖ Возможность проведения анализа на экране с метками и стандартными заключениями, вывод данной информации на печать
- ❖ Воспроизведение КТГ в режиме реального времени, 24-часовая кривая мониторинга, сохранение и воспроизведение данных
- ❖ При сбое электричества прибор запоминает последние 24 записи КТГ, в не зависимости от количества пациентов, переключается на работу от аккумулятора
- ❖ Звуковой и световой сигналы тревоги с настраиваемыми границами диапазона сигнала
- ❖ Автоопределение датчиков
- ❖ 12-ти кристалльные водонепроницаемые УЗ-датчики
- ❖ Благозащищенный ТОСО-датчик
- ❖ Сигнал предупреждения при наведении двух датчиков на 1 плод
- ❖ Возможность установки на столе или закрепления на стене
- ❖ Ручной маркер движений плода, автоматическое фиксирование движений плода
- ❖ Автоматический анализ КТГ: потери сигнала в %, схватки, акCELERации, децелерации, STV, LTV, время начала и окончания обследования

## КОМПЛЕКТАЦИИ

Параметры	6900-01	6900-02	6900-03	6900-04
ЧСС плода, 2 канала	•	•	•	•
Токотонометрия	•	•	•	•
Маркер движений плода	•	•	•	•
Прямое ЭКГ плода			•	•
Внутриматочное давление			•	•
ЭКГ матери		•		•
Неинвазивное давление матери		•		•
SpO2 матери		•		•
Температура		•		•
Сенсорный экран	•	•	•	•
Фетальный стимулятор	○	○	○	○

○ - опция

## 12-КРИСТАЛЬНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ДАТЧИК ЧСС ПЛОДА

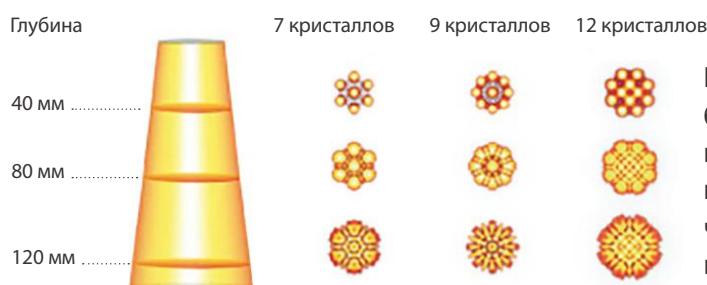

Превосходное качество сигнала обеспечивается большей глубиной проникновения луча и однородностью сигнала, а также лучшим пространственным разрешением, чем у традиционных датчиков с меньшим количеством пьезоэлементов.


# ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР ОВЕРТОН 6200

Удобное крепление датчиков  
на корпусе аппарата

Кнопка «быстрый старт»  
позволяет незамедлительно  
приступить к работе

Влагозащищенный  
ТОСО-датчик

Цветной откидной  
TFT-монитор диагональю 5,6"

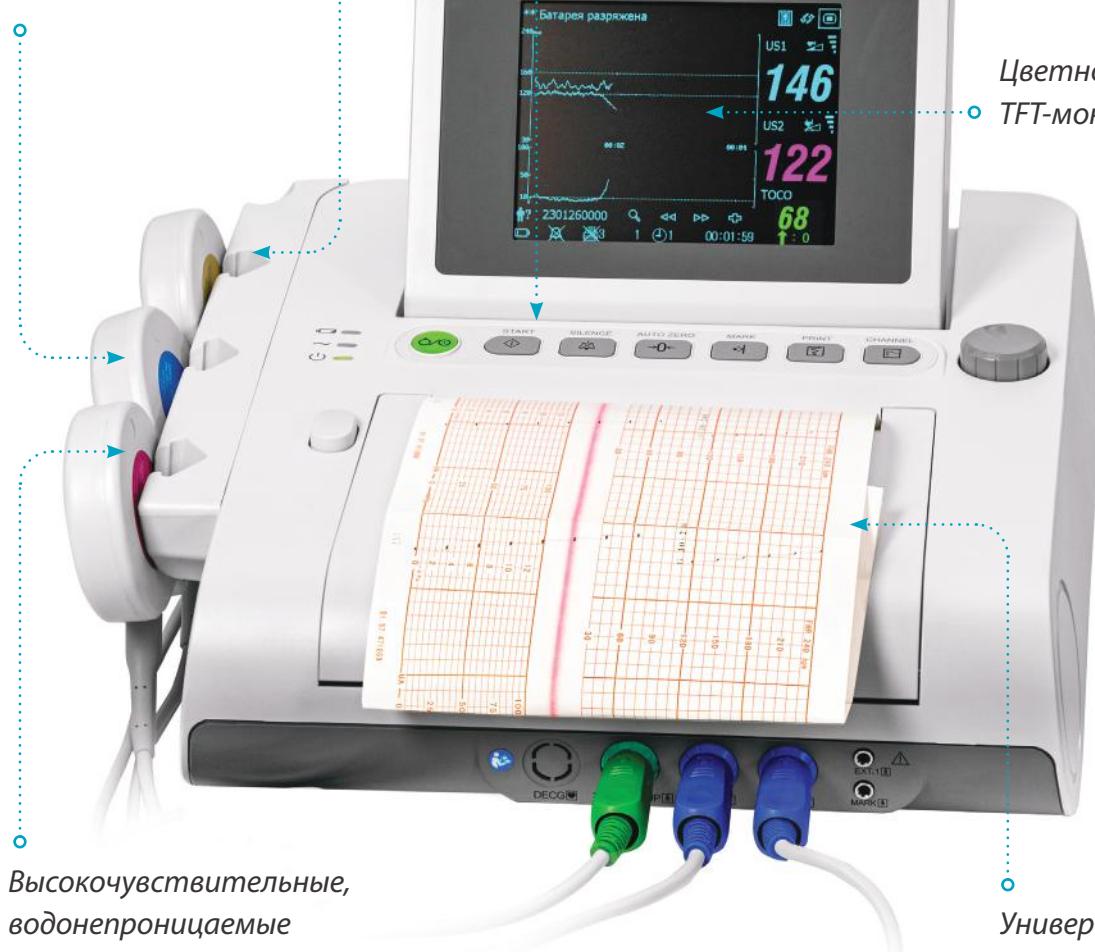

Высокочувствительные,  
водонепроницаемые  
УЗ-датчики

Универсальная бумага  
шириною 150 мм - 152 мм

## ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Функциональные кнопки и врачающееся колесико упрощают рабочий процесс, позволяя врачу устанавливать необходимую программу меньшим количеством нажатий.

# ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР ОВЕРТОН 6200

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- ❖ 3 режима работы экрана: режим трендов на полный экран, режим крупных цифр, режим одновременного отображения графических и цифровых параметров
- ❖ Программа автоматического анализа результатов в реальном времени с выводом на экран
- ❖ Анализ КТГ: LTV, STV, время начала и окончания измерения
- ❖ Балльная оценка по Фишеру
- ❖ Проведение прямого ЭКГ плода (DECg) и внутриматочного давления (IUP) (Овертон 6200-03)
- ❖ Сигнал предупреждения при наведении двух УЗ-датчиков на 1 плод (Овертон 6200-02)
- ❖ Цветовая дифференциация назначения датчиков
- ❖ При сбое электричества прибор запоминает последние 12 записей КТГ и переключается на работу от аккумулятора
- ❖ Программное обеспечение для передачи данных на ПК в стандартном комплекте
- ❖ Передача данных на ПК в режиме реального времени
- ❖ Встроенное программное обеспечение для соединения с центральной станцией
- ❖ Li-ion аккумулятор

## КОМПЛЕКТАЦИИ

Параметры	6200-00	6200-01	6200-02	6200-03
Цветной ЖК дисплей		•	•	•
Монохромный ЖК дисплей	•			
ЧСС плода, 1 канал	•	•	•	•
ЧСС плода, 2 канала	•		•	
Токотонометрия	•	•	•	•
Маркер движений плода	•	•	•	•
Прямое ЭКГ плода				•
Внутриматочное давление				•

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ

- ❖ Совместим со всеми фетальными мониторами Dixion
- ❖ Подключение к ЦС до 128 мониторов
- ❖ Удаленный мониторинг через клиент CNS
- ❖ Центральная станция с «обратным ответом»
- ❖ Встроенная функция анализа КТГ
- ❖ Емкость базы данных: 100 000 записей о пациентах и хранилище тревог, графики КТГ 24 часа для каждого пациента, 1440 записей по показателям жизненно важных функций
- ❖ Wi-Fi соединение
- ❖ Экспорт отчета в формате PDF и JPG

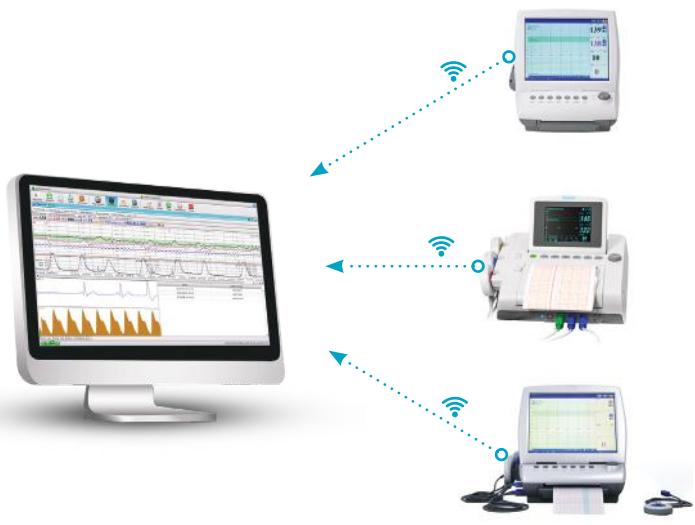

**DIXION**

# ФЕТАЛЬНЫЙ ДОППЛЕР ОВЕРТОН 6000

Допплеровский анализатор сердечно-сосудистой деятельности матери и плода предназначен для определения частоты сердечных сокращений плода в женских консультациях, а также для самостоятельного использования будущими мамами.



## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Удобная эргономичная форма и легкость в использовании
- ❖ Измерение сердцебиения плода в трех режимах: реального времени, усредненном или ручном режиме
- ❖ Аудио выход для соединения прибора с наушниками или ПК для записи ЧСС
- ❖ Работа от батареек или аккумулятора
- ❖ Точная регистрация сердцебиений плода и отображение результата на жидкокристаллическом дисплее

## КОМПЛЕКТАЦИИ

Параметры	6000-02	6000-05
Сменный УЗ-датчик	•	•
Аккумулятор и зарядное устройство	батарейки	•
Подсветка экрана		•
Возможность использования с 10-ой недели беременности	•	•

**DIXION**

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## ФЕТАЛЬНЫЙ СТИМУЛЯТОР



Устройство подает легкую вибрирующую стимуляцию через брюшную стенку матери на плод, когда тот спит, тем самым сокращая время, необходимое для нестрессового теста.

## СУМКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ФЕТАЛЬНЫХ МОНИТОРОВ



Сумка для Овертон 6900



Сумка для Овертон 6200



Сумка для Овертон 6000

## СТОЙКИ ДЛЯ ФЕТАЛЬНЫХ МОНИТОРОВ



- ❖ Стойки со специальным креплением прибора и полкой для ноутбука, на 5 колесах с тормозами, с корзиной (для Овертон 6900)
- ❖ Удобные и эргономичные стойки на 4-х крупных колесах с тормозами, выдвижные ящики для датчиков и бумаги (для Овертон 6900)
- ❖ Стойки с корзинами для размещения бумаги, датчиков и дополнительных принадлежностей, с регулировкой высоты и наклона платформы, на которую крепится монитор



---

Телефоны: +7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: [info@dixion.ru](mailto:info@dixion.ru), [www.dixion.ru](http://www.dixion.ru)