

DIXION

АКУШЕРСКИЕ КРОВАТИ



DIXION

АКУШЕРСКАЯ КРОВАТЬ INTELLIGENT

Безопасные и мобильные акушерские кровати DIXION предназначены для оказания медицинской помощи на всех этапах родов. Они удобны для рожениц и акушеров. Эргономичный дизайн позволяет медицинскому персоналу легко и быстро реагировать на любые ситуации, а пациентке чувствовать себя комфортно.

Сенсорная панель управления

Кнопка сердечно-легочной реанимации мгновенно переводит спинку в горизонтальное положение

Центральная педаль тормоза

Поручень используется роженицей во время родов

АКУШЕРСКАЯ КРОВАТЬ INTELLIGENT

Кровать может использоваться на стадии потуг, родов и послеродового восстановления, а также во время операции и реанимационных мероприятий. Таким образом, пациентке нужна только одна кровать на протяжении всего времени пребывания в родильном отделении.



АКУШЕРСКАЯ КРОВАТЬ INTELLIGENT

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Перемещение ножной секции по вертикальной оси позволяет выбрать удобное положение для роженицы
- ❖ Спинка и сидение модели управляются как единое целое: сидение поворачивается вверх при поднятии спинки. Эта функция препятствует сползанию вниз роженицы, упрощая управление спинкой и сидением
- ❖ Независимые перемещения вверх и вниз каждого держателя для ног. Два настраиваемых упора для ступней на каждом держателе, наклон которых меняется на любой угол от горизонтального уровня до полностью вертикального положения одной кнопкой
- ❖ Боковые поручни перемещаются по вертикальной оси и фиксируются в верхнем и нижнем положении
- ❖ Функция положения Тренделенбурга осуществляется благодаря пневматической пружине: кровать фиксируется в наклоне под любым углом из диапазона Тренделенбурга с помощью ручки управления наклоном
- ❖ Ручка управления наклоном расположена в изголовье кровати, ее можно использовать при экстренных случаях в комбинации с кнопкой сердечно-легочной реанимации
- ❖ Источник ночного освещения с регулировкой яркости можно включить ночью на длительное время, не тревожа пациента
- ❖ Лоток для отходов объемом 12 л

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Поднимание /
опускание кровати

Индикатор блокировки
функций

Индикатор зарядки
аккумулятора

Ночное освещение,
увеличение яркости

Ночное освещение,
уменьшение яркости

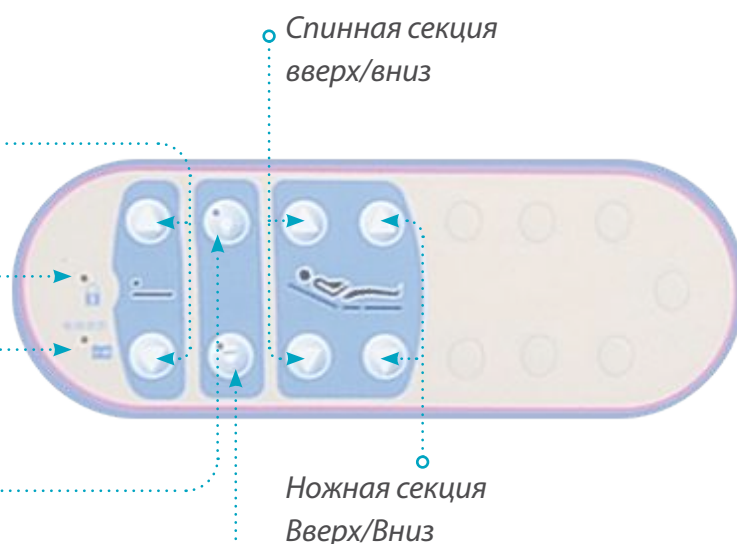

АКУШЕРСКАЯ КРОВАТЬ INTELLIGENT

ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КРОВАТИ

Положение «кресло» с упорами для ступней и поручнями для рук



- Угол поворота тазовой секции 13°
- Наклон ножной секции от 0 до 85°

Положение «кресло» с подколенными опорами по Геппелю и вспомогательным столиком

Наклон спинной секции от 0 до 63°



- Диапазон перемещения по вертикали ножной секции от 0 до 190 мм

Прямое положение «кровать»



Перемещение по вертикали выдвижных поручней 405 мм

- Положение «Тренделенбург» 8°

АКУШЕРСКАЯ КРОВАТЬ COMFORT



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Ультра-легкая ножная секция с безопасной нагрузкой 50 кг может быть расположена под ложем
- ❖ Легкосъемные торцевые ограждения кровати для быстрого доступа врачей во время проведения реанимации
- ❖ Электрический привод Тренделенбурга и Антитренделенбурга
- ❖ Электрический привод регулировки высоты
- ❖ Электрический привод регулировки угла наклона спинной секции
- ❖ Ручной пульт дистанционного управления
- ❖ Ножной пульт дистанционного управления (опционально)

АКУШЕРСКАЯ КРОВАТЬ COMFORT

ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КРОВАТИ

Прямое положение «кровать»



Прямое положение «кровать» с поднятой спинной секцией



Положение «кресло» с упорами для ступней



Положение «Тренделенбург»



КОМПЛЕКТАЦИИ

	Comfort	Intelligent
Положение Тренделенбурга	•	•
Положение Антитренделенбурга	•	
Электропривод регулировки положений:		
- Вверх/Вниз	•	•
- Спина	•	•
- Тренделенбург	•	
- Держатели ног		•
Ночное освещение		•
Сенсорные панели управления на боковых поручнях		•
Сердечно-легочная реанимация (CPR)		•
Пульт дистанционного управления	•	
Механическая ножная секция	•	
Ножная секция на электроприводе		•
Аккумулятор		•



Телефоны: +7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: info@dixon.ru, www.dixon.ru