

DIXION

ТРАНСПОРТНЫЙ ИНКУБАТОР БЭБИГАРД-1152



DIXION

ДАРИМ КАЖДОМУ МАЛЫШУ ШАНС НА ЖИЗНЬ


Каждая минута на счету. Каждый вдох — победа. Для недоношенного новорожденного, появившегося на свет раньше срока, безопасная и своевременная транспортировка в специализированное медицинское учреждение — это первый и самый важный шаг в борьбе за жизнь.

Перепады температуры, вибрация, невозможность оказать реанимационную помощь в пути — эти риски могут стать критическими для хрупкого организма малыша.

Мы меняем ситуацию. Представляем **транспортный инкубатор Бэбигард-1152 для недоношенных новорожденных** — мобильное «отделение реанимации и интенсивной терапии» на колесах.



- ❖ **Системы сервоконтроля** по температуре тела новорожденного и температуре внутри инкубатора
- ❖ **Сервоконтроль влажности и концентрации кислорода**
- ❖ **Цветной сенсорный LCD-дисплей 8,8"** с логично выстроенным интерфейсом, обеспечивающим быструю и удобную работу пользователя
- ❖ **Время автономной работы от встроенного аккумулятора до 6 часов**
- ❖ **Модуль мониторинга** с датчиками Masimo для контроля насыщения крови кислородом (SpO₂)
- ❖ **Многоуровневая система безопасности:** защита от перегрева, многоканальный мониторинг датчиков, звуковые и световые сигналы тревог

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТУ

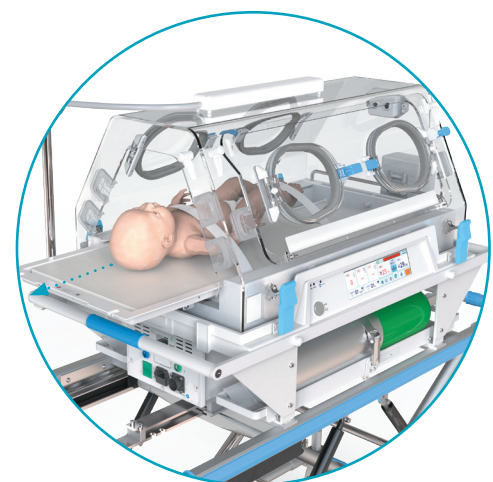


Купол с двойными стенками минимизирует потери тепла, возникающие при транспортировке


Полностью прозрачный купол с торцевой дверцей, через которую **выдвигается ложе пациента**, обеспечивая удобный доступ к новорожденному

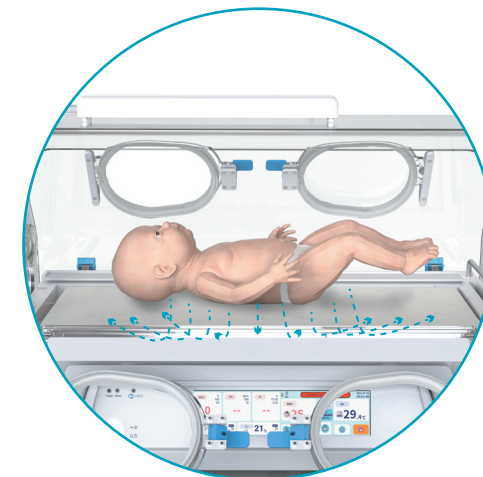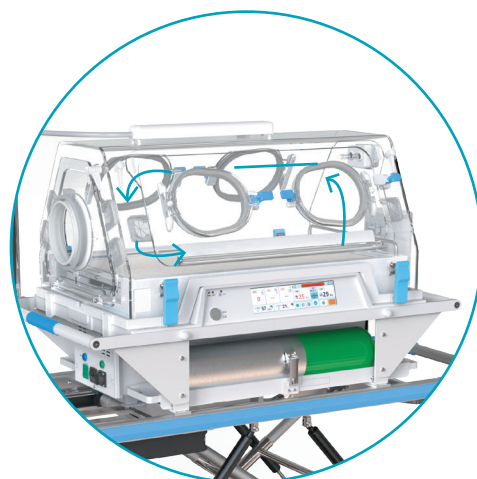

Мягкий водонепроницаемый матрасик с защитой от пролежней

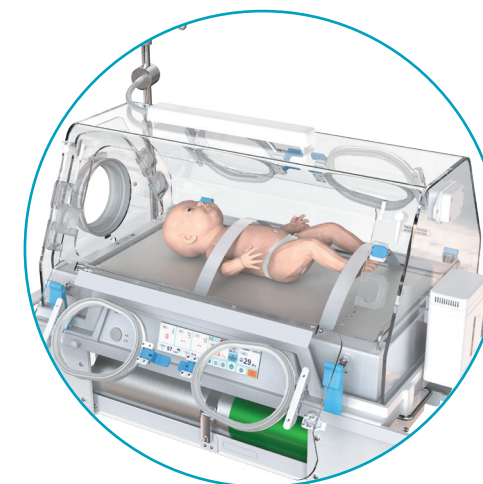


Фиксирующие ремни бережно удерживают новорожденного, не создавая избыточного давления, и обеспечивают безопасную транспортировку. Они **легко снимаются и заменяются**, что помогает снизить риск бактериального инфицирования при повторном использовании

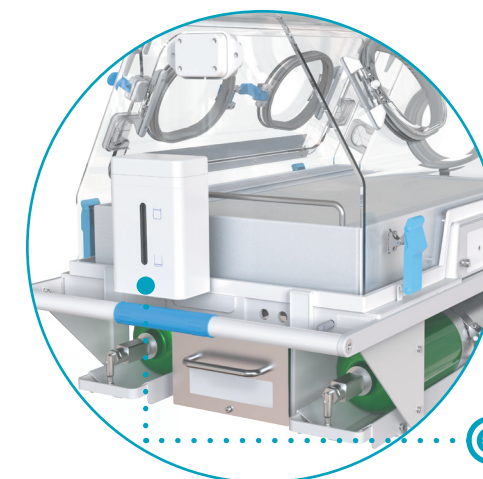

Внешний увлажнитель создает мелкодисперсный водяной туман с помощью УЗ высокочастотных колебаний, что позволяет быстро достичь оптимального для новорожденного уровня влажности



Внешний увлажнитель

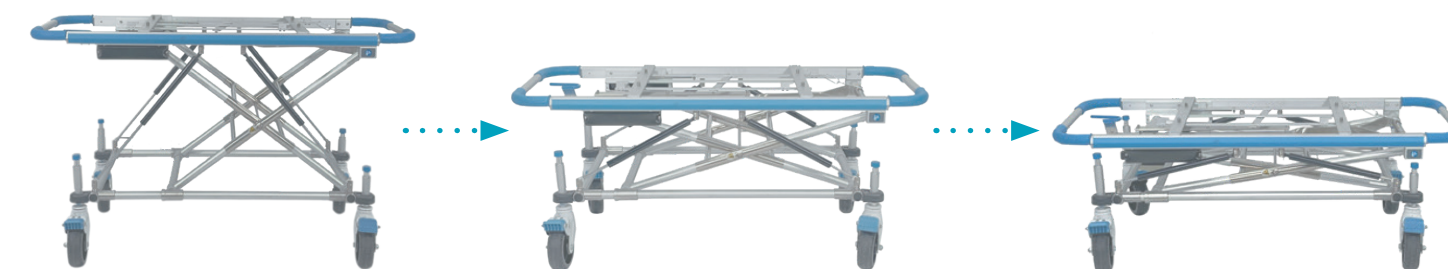

Тележка с регулировкой высоты обеспечивает удобство во время ухода за пациентом и диагностики, а также быструю транспортировку новорожденных в критическом состоянии внутри медицинского учреждения

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЭБИГАРД-1152

Сервоконтроль температуры	По воздуху По коже
Сервоконтроль концентрации кислорода	○
Сервоконтроль влажности	●
Управление	Сенсорный дисплей 8,8"
Модуль мониторинга SpO ₂	○
Купол с двойными стенками	●
Инфузионная стойка	●
Лампа для осмотра пациента	●
Функция > 37 °C	●
Ложё пациента выдвигается вбок через торцевую стенку	●
Время автономной работы от аккумулятора, ч	6
Защитное покрывало	○
Варианты тележек:	
Внутрибольничная тележка	●
Тележка для машин СМП	○

○ — опция



❖ Внутрибольничная тележка



❖ Тележка для машин СМП

DIXION

Телефоны: +7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

E-mail: neonatal@stormoff.com, info@dixon.ru, www.dixon.ru