

Коагуляторы Erbe для амбулаторной хирургии



VIO 100 и 50 С

Компактные аппараты для амбулаторных применений

VIO 100 С и VIO 50 С отвечают всем требованиям амбулаторной практики и имеют оптимальное соотношение цены и производительности



→ Гинекология

→ Пластическая и

эстетическая хирургия

→ Офтальмология

→ Оториноларингология

→ Дерматология

→ Экстренная хирургия

VIO 100 и 50 С

Компактные аппараты для амбулаторных применений



Экономически
эффективное
решение

Подходит для любых
амбулаторных
хирургических
вмешательств

Инструменты как
однократного, так и
многократного
применения

Универсальные гнезда
– подключение
инструментов других
производителей

Постоянная и
оперативная
поддержка наших
клиентов

Организация и
проведение мастер-
классов с ведущими
экспертами

VIO 100 и 50 С режимы

Электрохирургические аппараты VIO 100 С и VIO 50 С сочетают в себе следующие режимы резания и коагуляции с воспроизводимым эффектом на ткани:

Режимы резания



AUTO CUT

Стандартный режим для рассечений с минимальным некрозом и воспроизводимым качеством разреза



DRY CUT

Режим резания с усиленным гемостазом для операций, требующих надежный гемостаз

Режимы коагуляции



SOFT COAG

Мягкая коагуляция с глубоким проникновением, без карбонизации, с минимальной адгезией электрода



FORCED COAG

Быстрая и эффективная стандартная коагуляция со средней глубиной термического воздействия. Незначительный эффект карбонизации

VIO 100 и 50 С в амбулаторной хирургии

Гинекология

Примеры применений

- Хирургия шейки матки
- Взятие биопсии
- Пластика половых губ
- Кондиломы вульвы, влагалища, промежности
- Кисты влагалища
- Папилломы вульвы, влагалища
- Удаление генитальных невусов

Дерматология

Примеры применений

- Удаление новообразований кожи
- Взятие биопсии

Оториноларингология

Примеры применений

- Удаление новообразований / терморедукция тканей
- Остановка кровотечений



VIO 100 и 50 С стандартные комплектации

Инструменты и режимы

- одноразовые и многоразовые монополярные иглы



например, арт. № 21191-368

- одноразовые и многоразовые монополярные шпатели



например, арт. № 21191-361

- одноразовые и многоразовые монополярные петли



например, арт. № 21191-336

- одноразовые и многоразовые монополярные электроды-шарики



например, арт. № 21191-364

- биполярные пинцеты с антипригарным покрытием



например, арт. № 20195-506

- одноразовые и многоразовые держатели электродов



например, арт. № 20190-106



- VIO 100 C

арт. № 10140-500

- VIO 50 C

арт. № 10140-550

Режим
AUTO
CUT

Минимальный
некроз ткани по
краям разреза!

Коагуляция без
прилипания!


Режим
SOFT
COAG

VIO 100 и 50 С для хирургии шейки матки

Хирургия шейки матки

Примеры применений

- Биопсия
- Петлевая электроэксцизия
- Электрokonизация

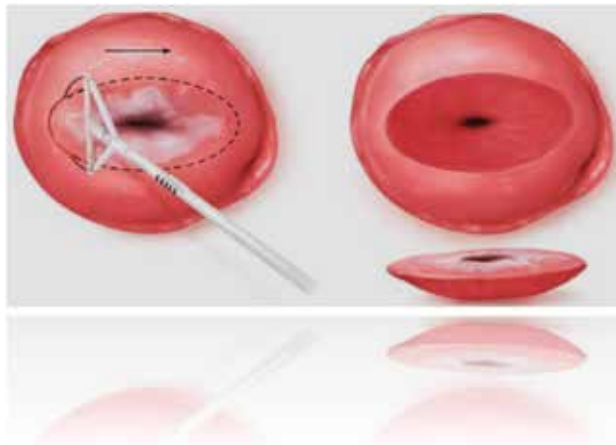

VIO 100 и 50 С для хирургии шейки матки

Инструменты и режимы

- одноразовые и многоразовые монополярные иглы



например, арт. № 21191-368

- одноразовые и многоразовые монополярные петли



например, арт. № 21191-343

- одноразовые и многоразовые монополярные электроды-шарики



например, арт. № 21191-328

- биполярные пинцеты с антипригарным покрытием



например, арт. № 20195-507

- одноразовые и многоразовые держатели электродов



например, арт. № 20190-117



- VIO 100 C

арт. № 10140-500

- VIO 50 C

арт. № 10140-550

Режим
AUTO
CUT

Минимальный
некроз ткани по
краям разреза!

Коагуляция без
прилипания!

Режим
SOFT
COAG

Нейтральный электрод NESSY® Ω



Neutral **E**lectrode **S**afety **S**ystem (NESSY) помогает предотвратить ожоги.

- ✓ Достаточный контакт с кожей
- ✓ Небольшие размеры
- ✓ Любая ориентация при наложении
- ✓ Запатентованная технология эквипотенциального кольца
- ✓ Предотвращение от ожогов

ERBE
VIO
300 D

NESSY

Neonatal NE-
Überwachung

Aus

59

Ohm

арт. № 20183-082
с кабелем арт. № 20194-077

Линейка коагуляторов Erbe VIO

erbe

Коагуляторы линейки Erbe VIO® – для любых применений



VIO® 300 D

VIO® 200 D



VIO® 300 S

VIO® 200 S



VIO® 100 C

VIO® 50 C

→ Модели серии D
класса high-end для
всех направлений
хирургии

→ Модели S –
экономичная
альтернатива
серии D

→ Компактные
аппараты для
амбулаторных
применений

Больше информации о продукции

WWW.ERBE-RUSSIA.COM

WWW.MEDICAL-VIDEO.COM





ООО «Эрбэ Электромедицин»
Адрес представительства:
119270 Москва
ул. Хамовнический вал, 12

Телефон +7 (495) 287-95-39
Факс +7 (499) 922-19-25
info@erbe-russia.com
erbe-russia.com