

Stormoff

info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
www.stormoff.ru

Медицинские силовые реабилитационные тренажеры



Медицинские силовые тренажеры HUR – это отличное комплексное решение для восстановительных нагрузочных упражнений, которое подойдет широкому кругу пациентов, нуждающихся в реабилитации.

Эргономика и эффективность

- **Механика тренажеров HUR основана на пневматическом сопротивлении**, которое возможно настроить на минимальный уровень нагрузки, близкой к нулю, для самой ранней реабилитации, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту.
- **Величина сопротивления может быть увеличена с шагом 100 г**, что позволит наиболее плавно увеличивать нагрузку.
- **Тренажеры HUR безопасны и эффективны**, что является наиболее важными критериями при выборе реабилитационного оборудования.



HUR «Natural Transmission»

**Система сопротивления
воздушному давлению**

- **Технология имитирует естественное сокращение мышечных волокон** и обеспечивает оптимальную нагрузку на мышцы по всей амплитуде движений, позволяя делать необходимые упражнения наиболее комфортным образом.
- **Негативная нагрузка на суставы и соединительные ткани сводится к нулю**, минимизируя риски получения травмы.
- **Технология основана на подаче нужного сопротивления в соответствии с приложенными усилиями**, независимо от темпа движения, что также позволяет проводить скоростные тренировки.



Реабилитационные тренажеры HUR Premium Line

Медицинские силовые тренажеры HUR представляют собой высококачественное реабилитационное оборудование для занятий лечебной физической культурой, которое отлично подойдет как для людей с ограниченными возможностями, так и пенсионного возраста. Конструкция гарантирует безопасность тренировок благодаря создающемуся пневматическому сопротивлению, позволяя установить близкую к нулю стартовую нагрузку и планомерное увеличение сопротивления на 100 г или 1 кг.


5120

Push Up/Pull Down Rehab (Жим вверх/Тяга вниз)



Стандартная комплектация

- Двойной функционал: жим вверх и тяга вниз
- Механическая регулировка сидения
- Стабилизирующая платформа
- Фиксирующий ремень
- Ограничители амплитуды
- Эргономичный подголовник
- Отдельная регулировка высоты угловых ножек

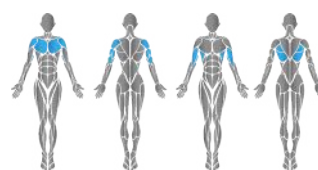

Длина	Высота
150 см	181 см
Ширина	Вес
100 см	71 кг


5140

Chest Press Rehab (Жим от груди в положении сидя)



Стандартная комплектация

- Механическая регулировка сидения
- Ограничитель начального положения рычагов
- Рукоятки для разного хвата
- Эргономичный подголовник
- Отдельная регулировка высоты угловых ножек

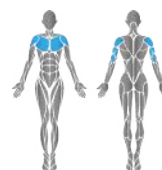

Длина	Высота
125 см	137 см
Ширина	Вес
113 см	80 кг

5160

Rec Deck Rehab (Сведение рук в положении сидя)



Стандартная комплектация

- Механическая регулировка сидения
- Рычаги с мягкой платформой для предплечий
- Ограничитель начального положения рычагов
- Эргономичный подголовник
- Отдельная регулировка высоты угловых ножек



Длина	Высота
100 см	132 см
Ширина	Вес
118 см	68 кг

5175**Optimal Rhomb Rehab (Разведение рук назад)****Стандартная комплектация**

- Механическая регулировка сидения
- Рукоятки для разного хвата
- Ограничитель начального положения рычагов
- Отдельная регулировка высоты угловых ножек




Длина 131 см Высота 109 см

Ширина 106 см Вес 67 кг

5310**Abdomen/Back Rehab (Наклоны корпуса вперёд и назад)****Стандартная комплектация**

- Механическая регулировка положения сидения и рабочего рычага
- Двойной функционал: наклоны вперёд и назад
- Ограничители амплитуды
- Отдельная регулировка высоты угловых ножек

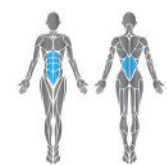

Длина 90 см Высота 121 см

Ширина 86 см Вес 64 кг

5340**Twist Rehab (Скручивания туловища)****Стандартная комплектация**

- Механическая настройка положения основания и спинки сидения
- Двойной функционал: скручивания влево и вправо
- Вспомогательные рукоятки
- Ограничители амплитуды
- Отдельная регулировка высоты угловых ножек



Длина 101 см Высота 118 см

Ширина 140 см Вес 71 кг

5510**Body Extension Rehab (Выпрямление туловища)****Стандартная комплектация**

- Вспомогательные рукоятки
- Ограничитель начального положения рычагов
- Фиксирующий ремень
- Эргономичный подголовник
- Отдельная регулировка высоты угловых ножек




Длина 125 см Высота 114 см

Ширина 107 см Вес 83 кг

5520**Adduction/Abduction Rehab (Сведение/Разведение ног)****Стандартная комплектация**

- Двойной функционал: сведение и разведение ног
- Вспомогательные рукоятки
- Ограничители амплитуды
- Эргономичный подголовник
- Отдельная регулировка высоты угловых ножек

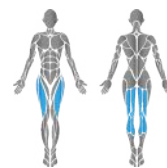


Длина 123 см Высота 126 см

Ширина 147 см Вес 71 кг

5530**Leg Extension/Curl Rehab (Разгибание/Сгибание ног)****Стандартная комплектация**

- Механическая регулировка спинки и рычагов для ног
- Фиксирующий ремень
- Двойной функционал: разгибание и сгибание ног
- Вспомогательные рукоятки
- Дополнительные ремешки для бедер
- Ограничители амплитуды
- Эргономичный подголовник
- Отдельная регулировка высоты угловых ножек

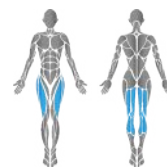


Длина 160 см Высота 137 см

Ширина 104 см Вес 92 кг

5540**Leg Press Rehab (Жим ногами попеременно)****Стандартная комплектация**

- Механическая регулировка спинки и ножных рычагов
- Вспомогательные рукоятки
- Дополнительные ремешки для ступней
- Блокировка движения
- Система предотвращения растяжения коленных связок
- Эргономичный подголовник
- Отдельная регулировка высоты угловых ножек

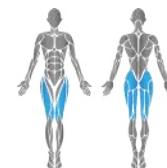

Длина 170 см Высота 135 см

Ширина 103 см Вес 120 кг

5546**Leg Press Incline Rehab (Жим ногами одновременно)****Стандартная комплектация**

- Механическая регулировка платформы для ног, спинки и плечевых стабилизаторов
- Вспомогательные рукоятки
- Блокировка начального положения
- Эргономичный подголовник



Длина 224 см Высота 128 см

Ширина 91 см Вес 115 кг

Реабилитационные тренажеры HUR Premium Line с доступом для инвалидов кресел-колясок

Тренажеры HUR Premium Line Easy Access отлично подойдут для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Конструкция позволяет пациентам на инвалидных колясках буквально «заехать» в тренажер и комфортно зафиксироваться перед началом выполнения упражнений. Такие тренажеры являются наиболее оптимальным решением для оснащения отделений физиотерапии и реабилитации, а также залов механотерапии в реабилитационных центрах.


9110

Biceps/Triceps Easy Access (Бицепсы/Трицепсы)



Стандартная комплектация

- Двойной функционал: тяга вверх и жим вниз
- Стабилизирующая платформа

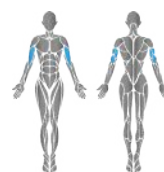

Длина	Высота
115 см	126 см
Ширина	Вес
113 см	86 кг


9120

Push Up/Pull Down Easy Access (Жим вверх/Тяга вниз)



Стандартная комплектация

- Двойной функционал: жим вверх и тяга вниз
- Фиксирующий ремень
- Ограничители амплитуды
- Стабилизирующая платформа

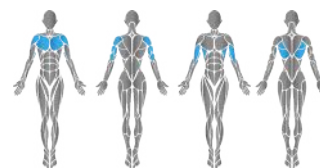

Длина	Высота
127 см	179 см
Ширина	Вес
107 см	68 кг


9125

Dip/Shrug Easy Access (Жим вниз/Тяга вверх)



Стандартная комплектация


- Двойной функционал: жим вниз и тяга вверх
- Механическая регулировка горизонтального положения рычагов
- Фиксирующий ремень
- Ограничители амплитуды
- Стабилизирующая платформа

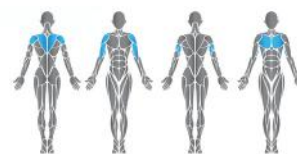

Длина	Высота
130 см	108 см
Ширина	Вес
105 см	67 кг

9140**Chest Press Easy Access (Жим от груди в положении сидя)****Стандартная комплектация**

- Рукоятки для разного хвата
- Блокировка движения
- Стабилизирующая платформа

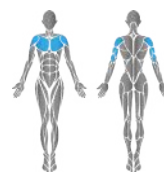

Длина 137 см
Высота 105 см

Ширина 130 см
Вес 80 кг

9150**Lat Pull Easy Access (Тяга к себе)****Стандартная комплектация**

- Рукоятки для разного хвата
- Блокировка движения
- Механическая регулировка страховки грудной клетки
- Функция разблокировки рычагов для удобного начала упражнений




Длина 105 см
Высота 110 см

Ширина 116 см
Вес 77 кг

9160**Rec Deck Easy Access (Сведение рук перед собой)****Стандартная комплектация**

- Рычаги с мягкой платформой для предплечий

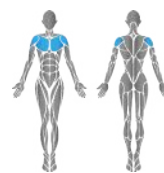

Длина 113 см
Высота 138 см

Ширина 143 см
Вес 78 кг

9175**Optimal Rhomb Easy Access (Разведение рук назад)****Стандартная комплектация**

- Рукоятки для разного хвата
- Механическая регулировка страховки грудной клетки
- Функция разблокировки рычагов для удобного начала упражнений




Длина 106 см
Высота 114 см

Ширина 110 см
Вес 78 кг

9310**Abdomen/Back Easy Access (Наклоны корпуса вперёд и назад)****Стандартная комплектация**

- Вспомогательные рукоятки
- Двойной функционал: наклоны корпуса вперед и назад
- Механическая регулировка положения, высоты и наклона сидения
- Опора для ног
- Откидывающаяся спинка и рабочий рычаг для комфортного начала и завершения упражнения

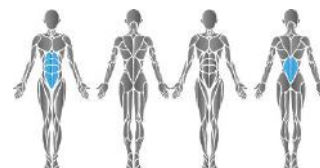

Длина 131 см Высота 171 см

Ширина 85 см Вес 85 кг

9330**Twist Easy Access (Повороты корпуса)****Стандартная комплектация**

- Блокировка рабочих рычагов
- Откидывающиеся рабочие рычаги для комфортного начала и завершения упражнения
- Двойной функционал: повороты корпуса вправо и влево



Длина 130 см Высота 126 см

Ширина 80 см Вес 60 кг

Многофункциональные блочные тренажеры

Тренажеры HUR Pulley сочетают в себе широкие возможности тренировок на все группы мышц. Благодаря своей универсальности, тренажеры отлично подходят как для регулярных физических занятий спортсменов, так и для реабилитации различных групп пациентов, в том числе на инвалидных колясках. С технологией Natural Transmission тренировки просты и безопасны, вне зависимости от уровня физической подготовки человека. HUR Pulley предлагается в двух комплектациях: с креплениями к стене или с рамным опорным основанием.

8830**HUR Pulley wall-mounted (Блочный тренажёр с креплением к стене)****Стандартная комплектация**

- 2 одиночные рукояти для рук
- Стропа-манжета для ног
- Удлинитель для тросов
- Вспомогательные рукоятки



Длина 87 см Высота 215 см

Ширина 83 см Вес 46 кг

8831**HUR Pulley free standing (Отдельно стоящий блочный тренажёр)****Стандартная комплектация**

- 2 одиночные рукояти для рук
- Стропа-манжета для ног
- Удлинитель для тросов
- Вспомогательные рукоятки




Длина 145 см Высота 215 см

Ширина 136 см Вес 79 кг


Пневматический принцип работы

Механика тренажеров HUR основана на особой методике сопротивления **Natural Transmission**, которая позволяет имитировать естественное мышечное сокращение.


Пневматический принцип работы в комбинации с плавным движением рычагов обеспечивает наиболее эффективную и стабильную нагрузку на мышцы для достижения более качественных результатов.

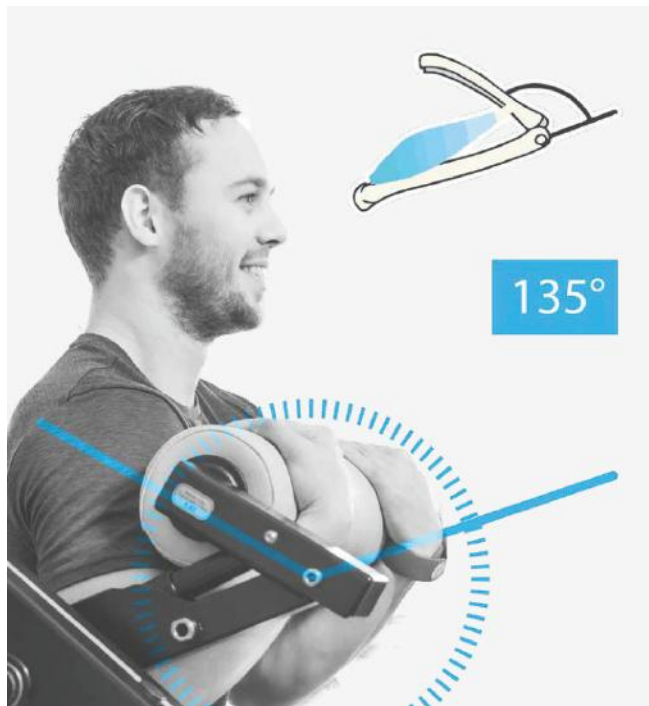

Сопротивление адаптируется к усилиям, производимым пациентом, независимо от скорости движения.

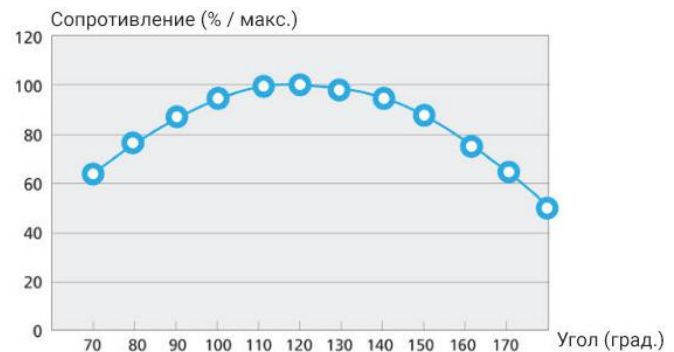

Тренажеры рекомендуется использовать для занятий с медленными и контролируемыми движениями. Увеличение скорости создает лишнюю инерцию, дестабилизируя нагрузку на мышечные волокна, из-за чего идет негативное воздействие на сустав и снижается тренировочный эффект.

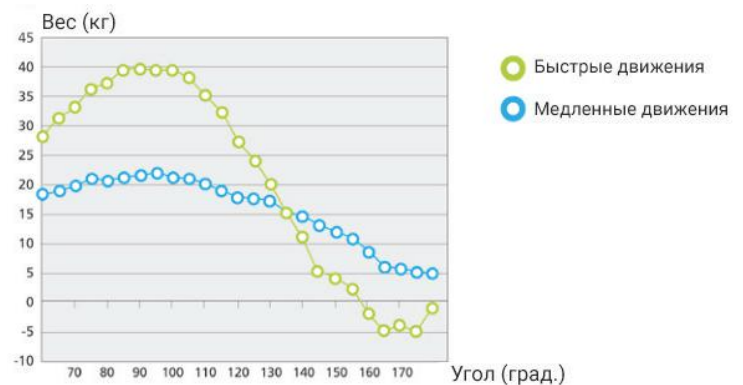

Рекомендуемые комплексы тренажеров

Базовый



5120 Push Up/
Pull Down
(Жим вверх/
Тяга вниз)



5530 Leg
Extension/Curl
(Разгибание/
Сгибание ног)



8830/8831HUR Pulley
wall-mounted
(Блочный тренажёр)

Стандартный



5310 Abdomen/
Back (Наклоны
вперёд и назад)



5530 Leg
Extension/Curl
(Разгибание/
Сгибание ног)



5140 Chest
Press
(Жим от груди)



8830/8831HUR
Pulley wall-mounted
(Блочный тренажёр)



5520 Adduction/
Abduction
(Сведение/
разведение ног)



5530 Leg
Extension/Curl
(Разгибание/
Сгибание ног)



5540 Leg Press
(Жим ногами
попеременно)

Расширенный



9330 Twist
Easy Access
(Повороты
корпуса)



5120 Push Up/
Pull Down
(Жим вверх/
Тяга вниз)



5510 Body
Extension Rehab
(Выпрямление
туловища)



5540 Leg Press
(Жим ногами
попеременно)



5520 Adduction/
Abduction
(Сведение/
разведение ног)



5175 Optimal
Rhomb
(Разведение рук)



5310 Abdomen/
Back
(Наклоны
вперёд и назад)



5140 Chest
Press
(Жим от груди)



5530 Leg
Extension/Curl
(Разгибание/
Сгибание ног)

Коды вида медицинских изделий

Модель	Код
5120 Push Up/Pull Down Rehab (Жим вверх/Тяга вниз)	266080
5140 Chest Press Rehab (Жим от груди перед собой в положении сидя)	266080
5160 Pec Deck Rehab (Сведение рук перед собой в положении сидя)	266080
5175 Optimal Rhomb Rehab (Разведение рук через стороны назад)	266080
5310 Abdomen/Back Rehab (Наклоны корпуса вперёд и назад)	328300
5340 Twist Rehab (Скручивания при неподвижном корпусе)	328300
5510 Body Extension Rehab (Выпрямление туловища)	266110
5520 Adduction/Abduction Rehab (Сведение/Разведение ног)	266110
5530 Leg Extension/Curl Rehab (Разгибание/Сгибание ног)	266110
5540 Leg Press Rehab (Жим ногами перед собой попеременно)	266110
5546 Leg Press Incline Rehab (Жим ногами перед собой одновременно)	266110
9110 Biceps/Triceps Easy Access (Бицепсы/Трицепсы)	266080
9120 Push Up/Pull Down Easy Access (Жим вверх/Тяга вниз)	266080
9125 Dip/Shrug Easy Access (Жим вниз/Тяга вверх)	266080
9140 Chest Press Easy Access (Жим от груди перед собой в положении сидя)	266080
9150 Тренажёр Lat Pull Easy Access (Тяга к себе)	266080
9160 Тренажёр Pec Deck Easy Access (Сведение рук перед собой)	266080
9175 Тренажёр Optimal Rhomb Easy Access (Разведение рук назад)	266080
9310 Abdomen/Back Easy Access (Наклоны корпуса вперёд и назад)	328300
9330 Twist Easy Access (Повороты корпуса)	328300
8830 HUR Pulley wall-mounted (Блочный тренажёр с креплением к стене)	328300
8831 HUR Pulley free standing (Отдельно стоящий блочный тренажёр)	328300





Stormoff

Оснащение медицинских учреждений

www.stormoff.ru
info@stormoff.com

+7 (495) 956-05-57