

Механическая потолочная консоль

Консоль с поворотными плечами HyPort 3000 позволяет легко оптимизировать процесс работы: оборудование можно разместить в наиболее удобном положении для открытия доступа к пациенту.



HyPort 3000

✓ Ключевые особенности:

- Упрощение процесса организации рабочего пространства, а также деятельности медицинских работников
- Набор специальных принадлежностей для удобного размещения оборудования в любом помещении
- Механические фрикционные стопоры всех плеч

⚙️ Функциональные возможности:

- Максимальная нагрузка: до 300 кг (с плечом высокой грузоподъемности)
- Большой диапазон регулировок: поворот на 340 градусов по горизонтали, регулировка высоты от 500 до 700 мм
- Радиус перемещения: 500–2500 мм



Моторизированная потолочная консоль

Консоль с вертикальным перемещением модуля HyPort 6000 дает возможность поднимать оборудование над полом, открывая при этом максимальный доступ к пациенту и экономя пространство.




HyPort 6000

✓ Ключевые особенности:

- Механические фрикционные стопоры
- Предусмотрен подъем наркозного или эндоскопического оборудования
- Раздельные отсеки для газовых патрубков и электрических розеток
- Модульный распределитель для упорядоченного расположения газовых и электрических выходов


⚙️ Функциональные возможности:

- Грузоподъемность: от 90 до 220 кг в зависимости от модификации плеча консоли
- Вращение в горизонтальной плоскости до 340°
- Встроенный блок управления рукояткой с кнопками в платформы
- Позволяют обеспечить радиус перемещени от 500 до 2500 мм (за счет возможности использования подвесных плеч разной длины)

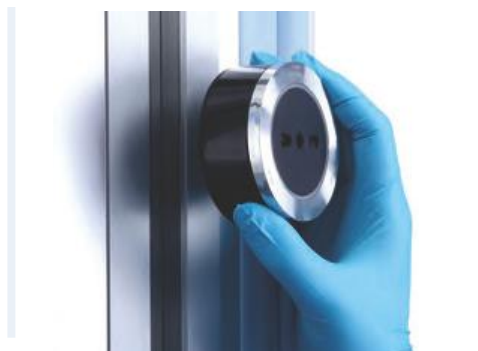

Горизонтальная потолочная консоль

Консоль HyPort 8000— это потолочная горизонтальная конструкция с 2 челночными тележками с двусторонним доступом, которая подойдет для палат интенсивной терапии.

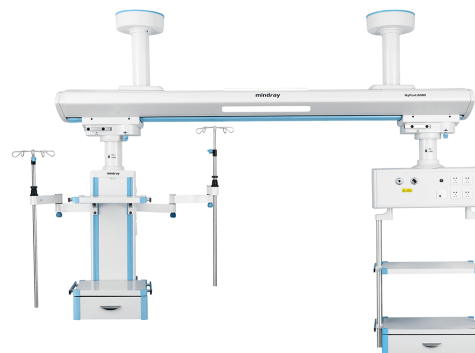

HyPort 8000 I/ II

✓ Ключевые особенности:

- Вращение на 340° с возможностью блокировки
- Доступ к газовым и электрическим выходам в балке
- Полный спектр газовых выходов
- Кабельный органайзер для проводов, кабелей и трубок
- Свет трех оттенков
- Рычаг для монитора с переходником VESA



Технические возможности

	HyPort 8000-I	HyPort 8000-II
Максимальное количество полок	6	12
Максимальная нагрузка	250 кг	250 кг
Поворотный шкаф с выдвижными ящичкам	•	•
Установка инфузионной станции	○	○

○ - опция

Моторизованная потолочная консоль с механизмом вертикального подъема

Консоль с вертикальным перемещением модуля HyPort 6000 дает возможность поднимать оборудование над полом, открывая при этом максимальный доступ к пациенту и экономя пространство.



HyPort 9000

✓ Ключевые особенности:

- Конфигурация с поворотным плечом
- Распределительный модуль оснащён электроприводом позволяющим регулировать высоту подъема наркозного аппарата или эндоскопической стойки.
- Механические фрикционные стопоры плеч

⚙️ Функциональные возможности:

- Грузоподъемность до 300 кг
- Подъемный механизм с возможностью перемещения до 400 мм
- Фиксатор для крепления НДА или эндоскопической стойки
- Вращение в горизонтальной плоскости 340°
- Радиус перемещения: 500–2500 мм

