

Операционный стол MK2S, RINI, Швеция


Современные операционные столы можно разделить на универсальные и специализированные. Универсальные столы способны легко трансформироваться под различные виды операций, в то время как специализированные обеспечивают комфортные условия для хирургии только в одном из направлений медицины. Стол RiEye Mk2S разработан специально для проведения любых видов офтальмологических операций.

Операционный стол RiEye Mk2S имеет современный привлекательный дизайн. Он разрабатывался в тесном сотрудничестве с врачами из Университетской больницы Сальгрэнска в Гётеборге (Швеция), что обеспечило его функциональность и эргономичность.

В основании операционного стола лежат 2 телескопические опоры с электроприводом. С помощью пульта ручного или ножного управления положение можно изменить от сидячего до горизонтального, 4 часто используемых положения пользователь может задать и сохранить самостоятельно. Функция перехода в положение Тренделенбурга активируется специальной кнопкой на пульте ручного управления.

Операционный стол RiEye Mk2S оборудован уникальной адаптивной рамой и сохраняет устойчивость даже на неровном полу. При перемещении стол легко двигается в заданном направлении. Эргономично расположенный центральный тормоз позволяет заблокировать все колёса и зафиксировать текущее положение стола, для удобства транспортировки предусмотрен контроль направления с фиксацией одного колеса.

Операционный стол RiEye Mk2S поставляется в трех модификациях — R5, R6 и R7, которые отличаются друг от друга только длиной ножной части. Для заказа доступны различные аксессуары, которые повышают удобство пациента и улучшают организацию рабочего места хирурга. Модель R5 подходит для небольших операционных, когда пространство в помещении клиники ограничено или необходимо полностью трансформировать стол в кресло. Модель R6 — хороший компромисс между мобильностью и комфортом для пациента, отличный вариант для проведения факоемульсификации катаракты. Модель R7 наилучшим образом подходит для длительных витреоретинальных операций с использованием анестезии.

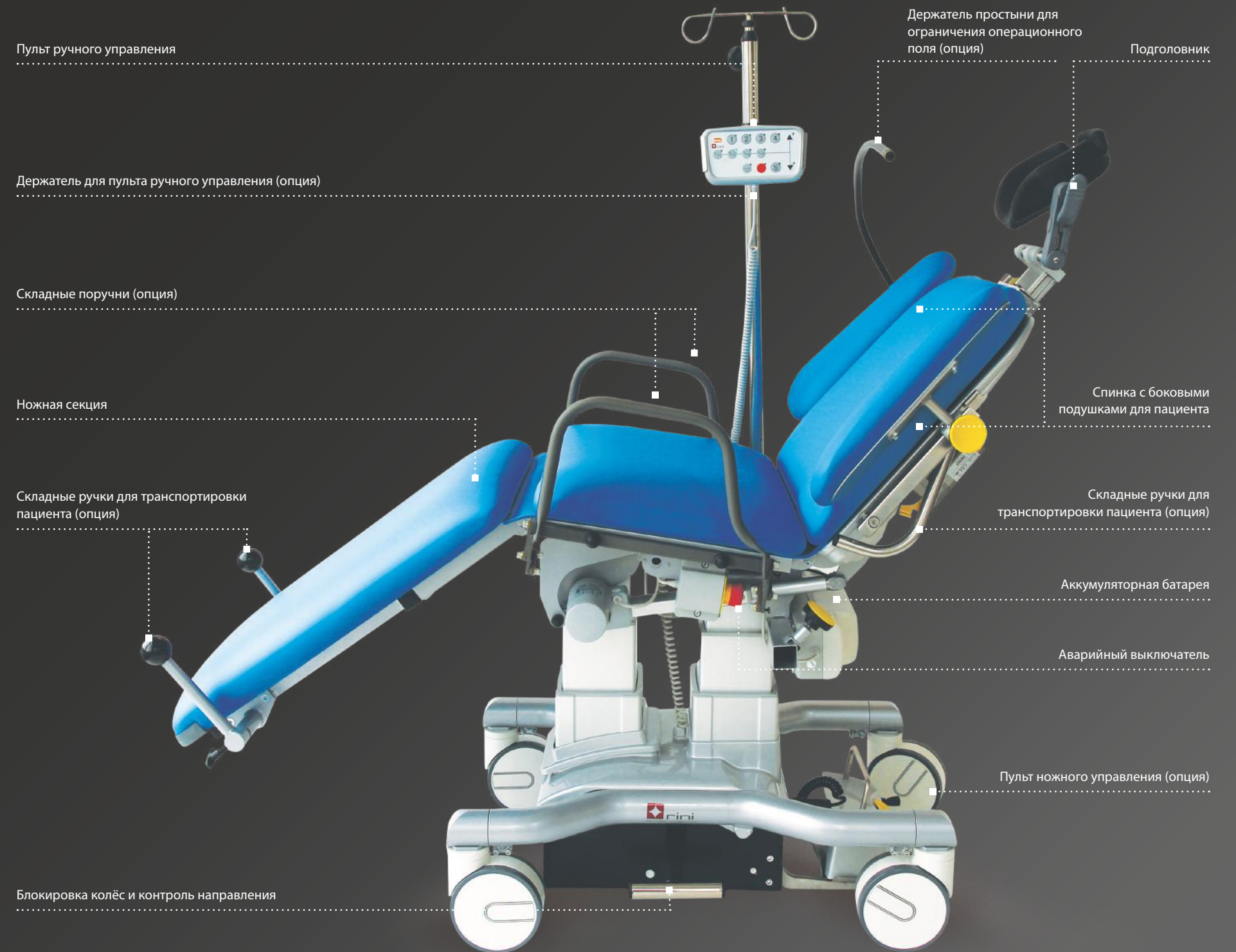

Операционный стол MK2S R5



Операционный стол MK2S R6



Подлокотник для анестезии (опция)



Пульт ножного управления (опция)



Панель ручного управления

Операционный стол Dixon ET200, TechartMed, Китай

Офтальмологический операционный стол ET200 специально разработан для использования в области офтальмологии и челюстно-лицевой хирургии. Базовые положения стола изменяются с помощью ножной педали. Для комфортного размещения врача-хирурга рекомендуется использовать специальную головную секцию с опорой для рук или операционный стул с подлокотниками.

Операционный стол Dixon ET200



MK2S R5/R6/R7



Dixon ET200

Производитель	Rini	TechartMed
Страна	Швеция	Китай
Максимальная длина, мм	1940 / 2030 / 2200	2080
Регулировка высоты, мм	500÷900	500÷700
Грузоподъемность, кг	300	173
Электропривод	+	+
Управление	Ручное (стандарт) / Ножное (опция)	Ножное
Центральная блокировка колёс	+	+
Запоминание положений стола	+	
Положение Тренделенбурга	+	
Регулировка наклона подголовника	Механическая (стандарт) / Электрическая (опция)	Механическая
Выбор цветовой гаммы обивки	+	