


Инжектор для КТ Sino Discovery D1 Sino MDT, Китай

Уникальный датчик измеряет давление в колбах и обеспечивает мониторинг в реальном времени для точного введения контрастного вещества пациенту.

Беспроводное соединение между пультом дистанционного управления и инжектором позволяет безопасно управлять процедурой из защищенной зоны.

Шаг скорости введения 0,01 мл/с с графическим отображением гарантирует полный контроль на каждом этапе инъекции.

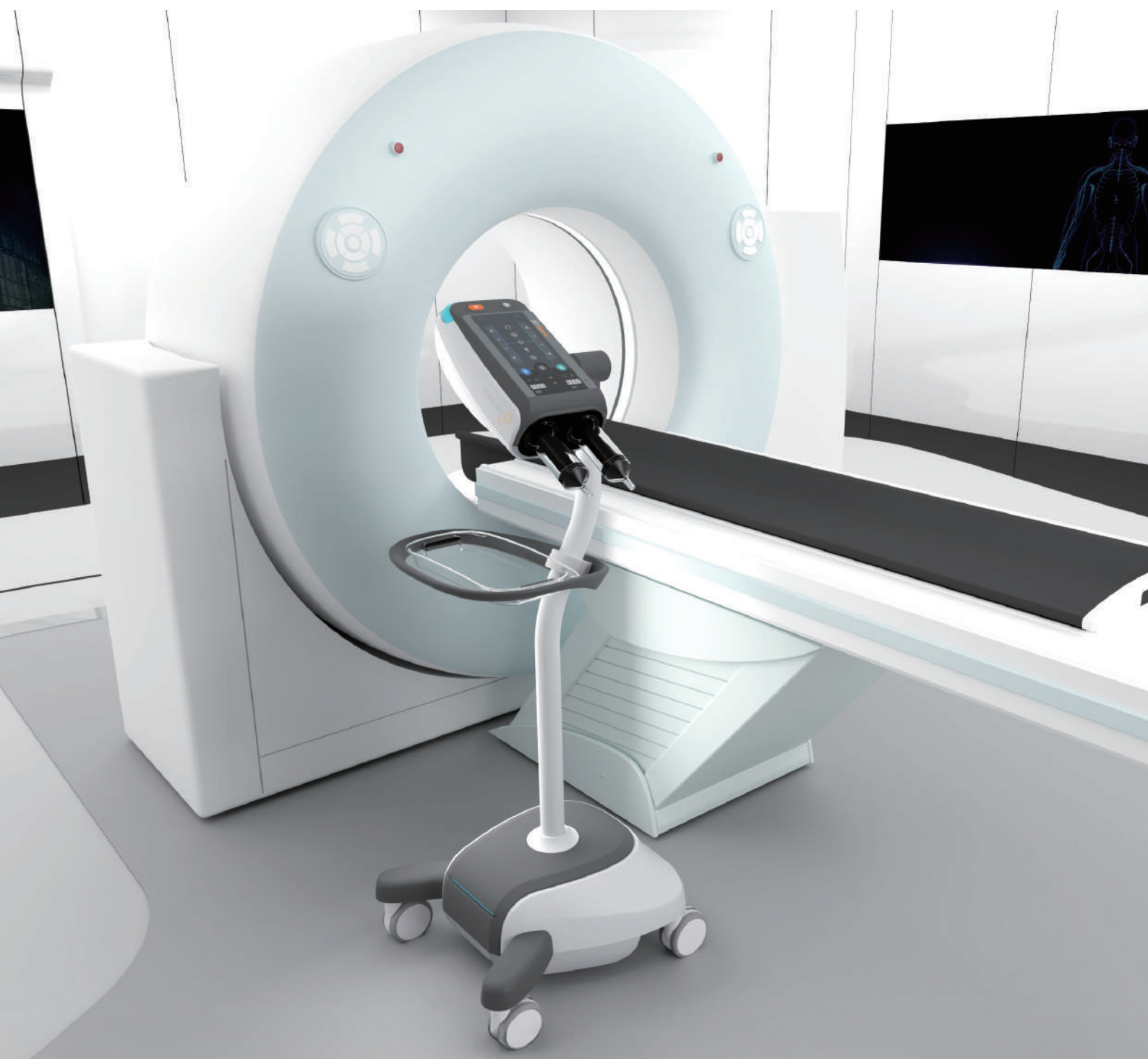



Интеллектуальная подготовка инъекции



Автоматическая
инъекция



Автоматическое
наполнение



Автоматическое
удаление пузырьков



Предварительное
наполнение




Автоматическое
отсоединение

100% беспроводное устройство

- Встроенная аккумуляторная батарея
- Соединение панели управления и инжектора через Wi-Fi



Допускает совместное использование с любым КТ

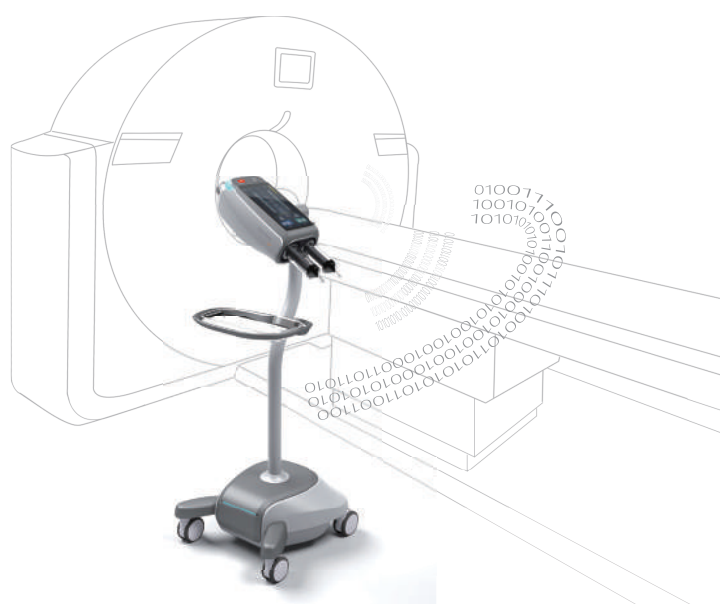

Технические характеристики

Объем шприцев	200 мл
Скорость инъекции	0,1–12 мл/с
Шаг регулировки	0,01 мл/с
Шаг установки объема инъекции	0,1 мл
Панель управления заполнением на блоке инжектора	сенсорная
Панель управления программированием протокола на блоке инжектора	сенсорная
Задержка инъекции	1–3600 сек
Задержка сканирования	1–3600 сек
Пауза	1–3600 сек
Емкость памяти протоколов	40
Макс. предел давления	345–2450 кПА
Встроенная аккумуляторная батарея	Опционально
Совместим с PACS	Да
Количество сохраняемых программ	Более 120