

Кассетный автоклав Statim G4, SciCan, Канада

Компания SciCan разработала семейство автоклавов STATIM, использующих инновационный процесс стерилизации хирургических инструментов. Применение запатентованной технологии вытеснения воздуха пульсирующей подачей пара высокого давления (PPPD) позволяет эффективно и быстро стерилизовать инструменты в период между приемом пациентов.

Автоклавы STATIM отвечают всем требованиям стандарта EN13060, при этом обеспечивают надежную стерилизацию со скоростью, которая в 5 раз выше скорости работы большинства обычных камерных автоклавов. Автоклавы STATIM позволяют стерилизовать инструменты всего за 9 минут. Кассетная система способствует быстрому нагреву и охлаждению, сокращая таким образом общее время обработки инструментов и время теплового воздействия на них, что в свою очередь продлевает срок службы дорогостоящих инструментов.


Автоклавы серии STATIM G4 имеют простой и интуитивно понятный интерфейс. С помощью большого сенсорного экрана с высоким разрешением осуществляется все управление и отображается вся информация о текущем цикле. Информация о каждом цикле документируется, сохраняется в памяти автоклава и может быть отправлена на электронную почту через интернет или другие устройства по USB.

Крышка резервуара/водяной фильтр


LCD-сенсорный экран

USB-порт

Кассета

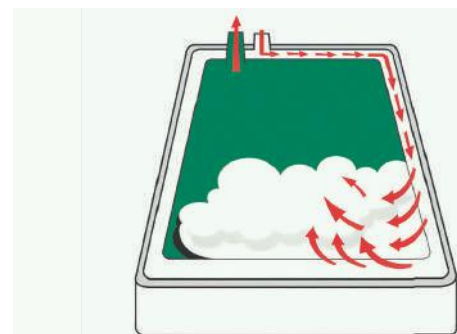

Впрыск пара в автоклаве STATIM 2000 G4/5000 G4

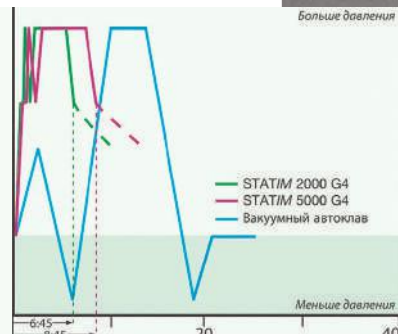

Ультрабыстрая фаза нагревания



Упакованный
фако-наконечник
в кассете STATIM 5000 G4



Сенсорный экран с высоким разрешением



Доступ к автоклаву STATIM можно получить
через интернет

Автоклав HS-2321BL, Hanshin, Ю. Корея

Автоклав с вакуумной сушкой В-класса стерилизации. Паровой стерилизатор предназначен для полного уничтожения и инактивации микроорганизмов на медицинских изделиях из металла, синтетических смол, резины, стекла, а также жидкостей. Дополнительно включает режим стерилизации прионов.

Данный автоклав подходит для различных офтальмологических клиник, так как имеет режим экспресс-стерилизации, при этом объем 21,5 л позволяет провести стерилизацию большого объема инструментов и принадлежностей.

Автоклав HS-2321BL



	STATIM 2000G4	STATIM 5000G4	STATIM 2000S	STATIM 5000S	HS-2321BL
Производитель	SciCan			Hanshin	
Страна	Канада			Южная Корея	
Тип загрузки	Кассета			Лотки	
Объем камеры, л	1,8	5,1	1,8	5,1	21,5
Размеры внутренние, см	28x18x3,5	38x18x7,5	28x18x4	38x18x8	4 лотка: 21,1x38,5x1,8
Управление	Сенсорный дисплей			Кнопки	Кнопки
Полная длительность минимального цикла, мин	9,15	13,15	9,15	13,15	24
Габариты, см	48,5x41,5x15	55x41,5x19	48,5x41,5x15	55x41x19	51,3x62,5x44,2
Вес, кг	21	33	21	33	53