

## Автоматический коагулометр



SF-8100

Анализатор, заслуживающий доверия



# Гарантия качества и надежности

## Загрузка 1000

кювет для эффективной работы анализатора

## Оптико-механический метод

детекции сгустка


### Меню тестов\*

- ПВ – протромбиновое время
- АЧТВ – активное частичное тромбопластиновое время
- Фибриноген
- ТВ – тромбиновое время
- Д-димер
- Антитромбин III
- FDP




#### Оптический метод детекции

Регистрируется время изменения мутности реакционной смеси

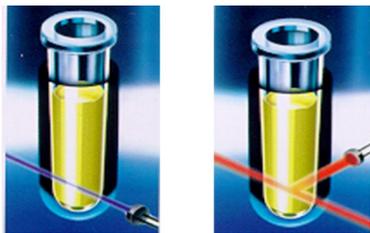

#### Механический метод детекции

Регистрируется изменение амплитуды колебания шарика

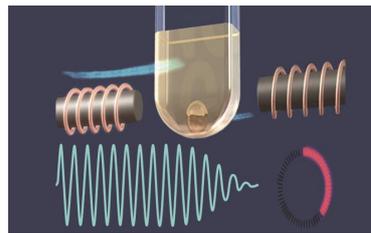

### Технические характеристики

Производительность	120 ПВ/час
Количество реагентов на борту	36 реагентов
Одновременная загрузка штативов	6 по 10 проб
Инкубационные каналы	16 каналов
Каналы измерения	8 каналов
Габариты (Д×Ш×В)	1000×700×700 мм
Вес	100 кг

## Функциональные возможности

- Клоттинговый, хромогенный, турбидиметрический методы
- Отсутствие влияния интерференции (гемолиз, липемия, иктеричность) на детекцию сгустка
- Совместимость с несколькими длинами волн для различных тестов, включая Д-димер, антитромбин III, факторы, протеин С, протеин S и т.д.
- Оптико-механический метод детекции сгустка

## Высококачественная технология

- Загрузка 1000 кювет для эффективной работы анализатора
- Возможность постановки на борт нескольких флаконов одного реагента
- Автоматическая перестановка теста при патологическом или сомнительном результате
- Сигнализация о недостаточном объеме расходных материалов
- Автоматическая промывка иглы для предотвращения контаминации
- Быстрый нагрев до 37 °С и автоматический контроль температуры каналов инкубации

## Удобное управление пробами

- Определение положения, автоматическая блокировка и индикатор загрузки штатива
- Режим STAT
- Считыватель штрихкода образцов
- Поддержка двухсторонней связи с LIS

## На анализаторе SF-8100 используются реагенты, контроли, калибраторы и расходные материалы производства Beijing Succeeder Technology Inc.

- Наличие ID-карты в наборе реагентов: автоматическое считывание лота, срока годности, калибровочной кривой и другой информации
- Системные промывающие растворы доставляются в виде концентрат
- Считыватель штрихкодов реагентов, автоматическое распознавание типа и положения реагента

\* Ожидается расширение перечня тестов





# Stormoff

Оснащение медицинских учреждений

[www.stormoff.ru](http://www.stormoff.ru)  
[lab@stormoff.ru](mailto:lab@stormoff.ru)

**+7 (495) 780-07-95**  
**+7 (495) 956-05-57**