


TECNIS Symfony®

ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса

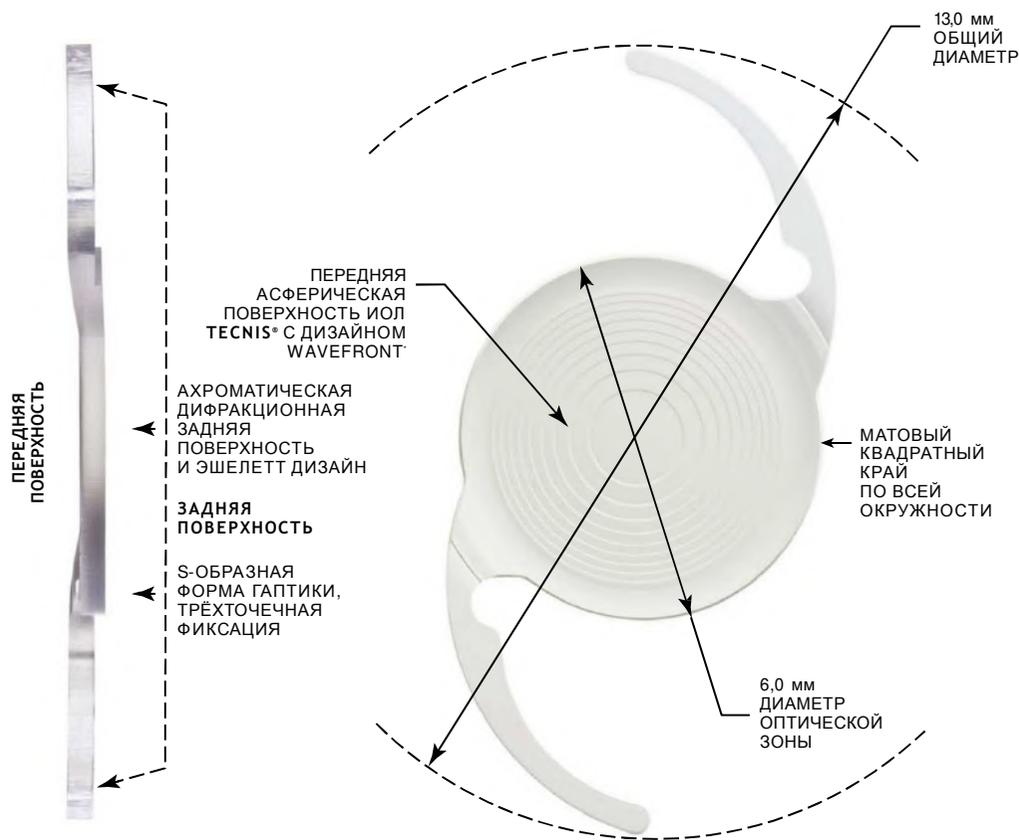

* Вейвфронт

TECNIS
Symfony®

ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса

Модель: ZXR00

ОПИСАНИЕ

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая сила	+5,0 D до +34,0 D с шагом в 0,5 диоптрии	
Диаметр оптической зоны	6,0 мм	
Толщина по центру	0,7 мм (20,0 D)	
Форма	Двояковыпуклая, передняя асферическая поверхность, задняя ахроматическая дифракционная поверхность для усиления восприятия контрастности и эшелетт дизайн, который позволяет продлевать диапазон фокуса света	
Материал	Гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром	
Рефракционный индекс	1,47 при 35 °C	
Дизайн края	Матовый ProTEC*, квадратный край по всей окружности	
ОПТИЧЕСКАЯ БИОМЕТРИЯ	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ	ОПТИЧЕСКАЯ
A-константа [†]	118,8	119,3
Глубина передней камеры	5,4 мм	5,7 мм
Хирургический фактор [‡]	1,68 мм	1,96 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАПТИКИ

Общий диаметр	13,0 мм	
Толщина	0,46 мм	
Тип	S-образная форма	
Материал	Гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром	
Дизайн	TRI-FIX** трёхточечный дизайн S-образная форма гаптики, однокомпонентная	

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

UNFOLDER® Платинум: Инжектор	DK7796
UNFOLDER® Платинум: Картридж	1MTEC30

* Протек
** Трификс

[†] Получено по результатам клинической оценки платформы моноблочной линзы ИОЛ для оптической биометрии.

[‡] Значение, теоретически полученное для типичной линзы 20,00D. Компания "Джонсон & Джонсон" рекомендует хирургам персонализировать A-константы, основываясь на своих хирургических техниках и оборудовании, опыте работы с моделью линзы и постоперационных результатах.