

Система конвекционного обогрева RAMONAK AIR TAXAT, Беларусь

Оптимальная терморегуляция — важнейшая часть современной интенсивной терапии

Системы конвекционного обогрева играют важную роль в поддержании нормальной температуры тела пациента в критические периоды лечения — во время операций, в реанимации и интенсивной терапии. Даже умеренное переохлаждение повышает риск послеоперационных осложнений, замедляет заживление и увеличивает срок госпитализации, поэтому своевременная коррекция температурного баланса является важной задачей клинической практики.

Конвекционный обогрев обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха по поверхности тела, помогая предотвращать и устранять гипотермию, что подтверждается широким применением таких систем в ведущих медицинских центрах России.



Ключевые особенности

- Поддерживание заданной температуры в течение 24 часов в сутки
- Непрерывный режим работы
- Возможность использования 1 блока управления с 2 одеялами одновременно (опция)
- Встроенная защита от перегрева с автоматическим отключением
- Удобная панель управления с настройкой температуры и скорости работы
- Звуковая и световая сигнализация, голосовые подсказки
- Тихий режим работы
- Возможность закрепить блок управления на ручке стола/кроватьи (опция)

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур	32–46 °C
Количество температурных режимов	5
Количество скоростей подачи воздуха	3
Время нагрева системы до 37 °C	до 1 мин
Минимальный уровень шума на расстоянии 1 м	не более 65 дБА
Масса блока управления	7 кг

Одеяла для конвекционного обогрева пациента RAMONAK AIR — эффективный и безопасный обогрев пациента на операционном столе

Одноразовые одеяла для детей и взрослых

Мягкий тканеподобный материал, устойчивый к разрывам, проколам и воздействию жидкостей

Универсальны, совместимы с конвекционной системой RAMONAK AIR и приборами других производителей

Адгезивные полосы для фиксации на теле пациента (BBF одеяла)

Выбор модели одеяла в зависимости от клинической ситуации, вида и локализации хирургического вмешательства

Широкий ассортимент одеял для детей и взрослых

Серия BBF

3 слоя
Дополнительная
фильтрация




Верхний слой из нетканого материала, не пропускает воздух

Средний слой из полиэтиленовой пленки с отверстиями

Нижний слой из нетканого материала, пропускающий воздух, не имеет отверстий и проколов

Серия BB

2 слоя
Не пропускает
воздух

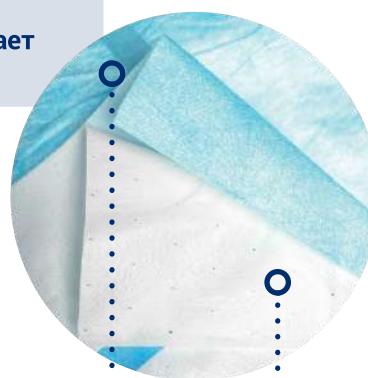

Верхний слой из нетканого материала, не пропускает воздух

Нижний слой из нетканого материала, имеет вентиляционные отверстия для выхода теплого воздуха


BBF-021

Одеяло укрывное
полноразмерное




BBF-022

Одеяло укрывное
для нижней части тела

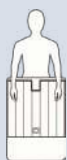

BBF-023

Одеяло укрывное
для верхней части тела

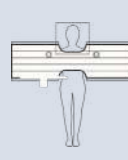

BBF-024

Одеяло укрывное
детское




BB-031

Одеяло укрывное
полноразмерное



BB-032

Одеяло укрывное
для нижней части тела

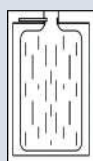

BB-033

Одеяло укрывное
для верхней части туловища




BB-034

Одеяло укрывное
для верхней части тела



BB-035

Одеяло укрывное с доступом
к брюшной полости

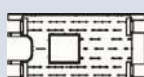


BB-036

Одеяло подкладное
с полным доступом к телу



BB-037

Одеяло подкладное
для литотомии

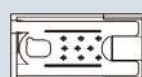

BB-038

Одеяло подкладное детское
с полным доступом к телу

