

Vision Assist

Автоматическая сканирующая система



Vision Assist

Автоматическая сканирующая система



Основные характеристики

- Загрузка 1 или 4 слайдов
- Автоматическое сканирование образцов
- Автоматический анализ и классификация
- Для небольших и средних лабораторий

Этапы сканирования




01

Поместите слайд в микроскоп



02

Запустите сканирование слайда

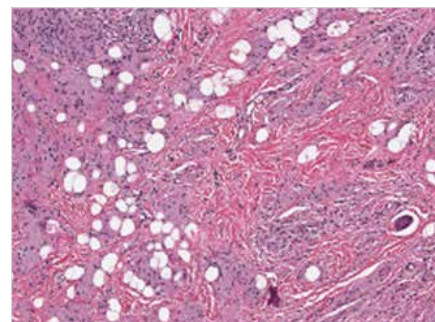

03

Получите результат

Применение



Гематология

Vision Hema — автоматический анализ мазка крови

Vision Extended RBC — расширенный анализ эритроцитов

Vision Extended PLT — расширенный анализ тромбоцитов

Vision RET — анализ ретикулоцитов



Костный мозг

Vision Bone Marrow — автоматический анализ клеток костного мозга



Биологические жидкости

Vision Body Fluids — автоматический анализ жидкостей человека



Цервикальная цитология

Vision Cyto Pap — автоматический скрининг рака шейки матки

Vision Cyto Pap ICC — автоматическая оценка иммуноцитохимической реакции



Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)

Vision Cyto STD — автоматический анализ инфекций, передающихся половым путем



Микробиология

Vision Gram — автоматический анализ мазка по Граму

Vision Extended Gram — расширенный анализ мазка по Граму



Анализ спермы

Vision Sperm — автоматический анализ спермы (CASA)



Цитогенетика

Vision Karyo — автоматическое кариотипирование хромосом

Vision Metaphase Finder — автоматический анализ метафазных пластин



Цитология и гистопатология

Vision Cyto — визуализация и организация цитологических исследований

Vision Slide — гистологические, клинические и научные исследования



Ветеринария

Vision Slide Vet — цифровая цитология и гистопатология

Vision Hema Vet — автоматический анализ мазка крови животных

Vision Karyo Vet — кариотипирование хромосом животных и растений

Спецификации

Основные характеристики	Vision Assist
Режим работы	Очередь (только для 4 слайдов)
Сканирование	Автоматическое
Загрузка слайда	1 или 4 слайда
Компоненты системы	Сканирующий микроскоп Рабочая станция Монитор
Объективы*	10x, 20x, 40x, 50x МИ, 100x МИ
Метод исследования	Светлое поле
Освещение	По Келлеру, LED
Коммуникации	Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7

* Зависит от комплектации

Дополнительные сервисы

Vision Slide Viewer	www.visionviewer.ru
Бесплатное ПО для установки на персональный компьютер с ОС Windows	Для просмотра цифровых препаратов на персональном компьютере
Pathoview	www.pathoview.ru
Сервис для работы с цифровыми препаратами через интернет-браузер	Для загрузки, просмотра, хранения и обмена цифровыми препаратами
Vision Suite	www.vision-suite.ru
Сервис для удаленной работы с ПО Vision через интернет-браузер	Для работы с базой данных и результатами анализов Vision в облаке
Vision Expertise	www.vision-expertise.ru
Сервис для онлайн-тестирования специалистов в микроскопии	Для обучения, проверки знаний и повышения квалификации специалистов

Проверьте целевое использование и наличие регистрации в законодательстве вашего региона.
В зависимости от правил определенного региона, некоторые продукты могут использоваться только в исследовательских целях.
Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.wm-vision.com

Официальный дистрибьютер в России:
ООО «Медика Продакт»
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс: +7 (495) 787-44-01
info@medicaproduct.ru, www.wm-vision.ru