

# Stormoff

info@stormoff.com  
+7 (495) 956-05-57  
www.stormoff.ru

## Урологические протезы

**ZSI**

ZSI 100/375, PF/475



# Пенильный протез ZSI 475

Устройство ZSI 475 — это гидравлический пенильный протез для лечения эректильной дисфункции, вызванной ограниченным притоком крови к половому члену или повреждением нервов.

## 3-компонентная надувная система



### Надувные баллоны

Два надувных баллона имплантируются в дистальные отделы пещеристого тела полового члена.


### Насос

Ручной насос надувает и сдувает баллоны. Имплантируется в мошонку.

### Резервуар

Резервуар имплантируется в область малого таза и заполняется физиологическим раствором. В нем хранится достаточное количество физиологического раствора для наполнения и сдувания баллонов.

Все стандартные длины\* фаллопротеза и все одноразовые вспомогательные материалы в одном блистере:

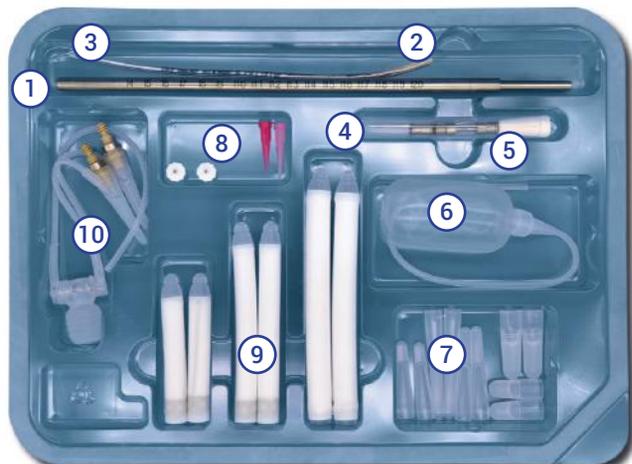

- 1 Устройство введения (интродьюсер) с измерительной шкалой
- 2 Шпатель
- 3 Шовные нити
- 4 Иглы для интродьюсера и коннектора
- 5 Коннекторы (соединители)
- 6 Емкость на 80 мл
- 7 Дистальный и проксимальный удлинители позволяют легко регулировать размер имплантата
- 8 Иглы для заполнения системы раствором
- 9 Протезы дистальных отделов пещеристого тела. На выбор предлагаются три пары цилиндров разной длины
- 10 Нагнетающее устройство (насос)

DISTAL EXTENDERS



PROXIMAL EXTENDERS



1 Внутренняя трубка: медицинский силикон

2 Средняя трубка: биосовместимый полиэстер



3 Внешняя трубка: медицинский силикон

### 3 слоя для обеспечения оптимальной жесткости:

Риск повреждения силиконовой конструкции значительно снижается даже при сильном давлении.

\* — комплект фаллопротеза большого размера (22 см) с удлинителями от 21 до 25 см, доступен в отдельном блистере.

# Пенильный протез ZSI 100

Полуригидный пенильный протез ZSI 100 представляет собой два имплантата из биосовместимого силикона с серебряным стержнем в центральной части. Устройство обеспечивает удобство ношения и высокую удовлетворенность пациентов качеством полового акта на долгое время.

## Доступны 3 диаметра:

ZSI 100 выпускается в трех вариантах диаметра для наилучшего соответствия анатомии пациентов: 9, 11, 13 мм.



## Регулируемая длина от 12 до 26,5 см:

Хирург может уменьшить дистальную и проксимальную часть имплантата для изменения длины.

## Комфорт пациента:

Дистальная часть имплантата гибкая — для естественных тактильных ощущений во время близости и удобного расположения головки полового члена при ношении одежды.



Дистальная часть  
16 секций по 5 мм  
Общая длина:  
80 мм + наконечник 5 мм

Центральная часть  
Длина — 115 мм

Проксимальная часть  
5 секций по 10 мм  
Общая длина — 50 мм

Эти секции можно обрезать

Эти секции можно обрезать



Дистальный наконечник обеспечивает закругленную форму дистального конца имплантата для безопасности и комфорта пациента и естественности ощущений

Выполнен из высококачественного медицинского силикона

Надежный гибкий стержень из серебра обеспечивает долговечность имплантов

Проксимальный удлинитель 15 мм, можно обрезать до 10 мм для удлинения проксимальной части при необходимости

# Искусственный сфинктер мочевого пузыря ZSI 375 PF

# Stormoff

ZSI 375 PF — решение проблемы недержания мочи у мужчин. Манжета вокруг мочеиспускательного канала искусственно воспроизводит механизм работы мочевого сфинктера. Пациент может контролировать время мочеиспускания, нажимая на насос в мошонке, который открывает манжету и опорожняет мочевой пузырь.



## В системе всего 2 компонента:

- **Манжета**  
Устройство снабжено уникальной надувной регулируемой манжетой, которая подходит для мочеиспускательного канала разного диаметра.
- **Помпа**  
Помпа с резервуаром, регулирующим давление, устанавливается в мошонке.



### Сканеры в аэропортах и МРТ

- Пациент может путешествовать с ZSI 100/375 PF/475. Сканеры в аэропорту его не обнаружат.
- Имплантаты также безопасны для МРТ (медицинских сканеров).