

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД

ДЕЛИКАТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД
ВЕРНУТЬ МОЛОДОСТЬ ЛИЦА И УПРУГОЕ ТЕЛО
БЕЗОПЕРАЦИОННЫМ, НЕИНВАЗИВНЫМ СПОСОБОМ

Аппарат radioSURG 2200 (2,2 МГц) - для борьбы с возрастными изменениями кожи



При работе на аппарате Вы используете метод RF-ReFacing.

RF-ReFacing (rf-lifting) - это радиоволновая терапия, при которой происходит непосредственное воздействие на кожу лица электрическим током высокой частоты, подогревающим дерму (соединительную часть кожи между эпидермисом и нижними слоями) и подкожно-жировую клетчатку. Тепло, полученное в результате воздействия радиочастотного тока, проникает под кожу на глубину 3 – 9 мм и меняет структуру коллагена, вызывая контролируемые сокращения его волокон.

Его измененная структура способствует повышению плотности дермы, а также оказывает подтягивающий эффект кожи лица. Данную методику можно применять для всех типов кожи и в любом возрасте. Результат виден уже после первой процедуры. Нет никаких беспокоящих, видимых повреждений, синяков или отеков. Специально разработанная методика RF-ReFacing применяется на основе натуральной дерматологической косметики (например KOKO dermaividuals).



На каких частях тела можно проводить процедуру?

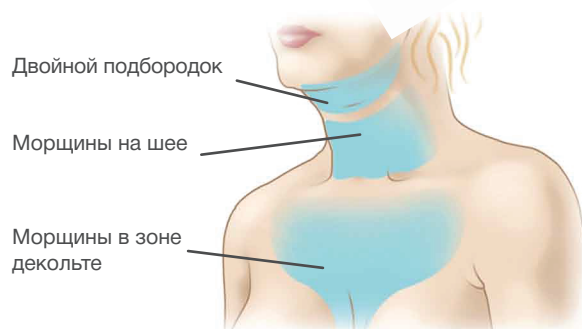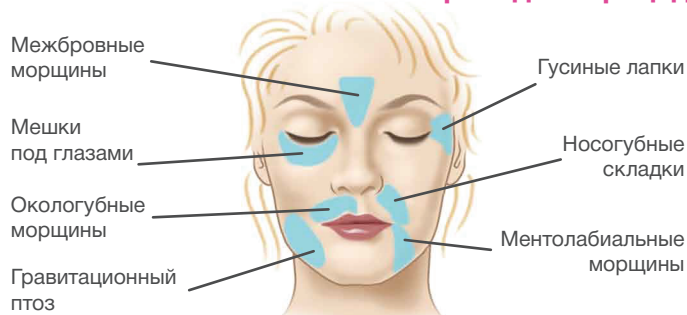

Процедуру **RF-ReFacing®** проводят в области лица, шеи и декольте, так как большинство пациентов предпочитает улучшить состояние открытых областей тела.

- Минимизируются морщины
- Черты лица обретают четкость
- Складки в области декольте исчезают
- Уменьшаются мешки под глазами
- Морщины на шее разглаживаются

Метод **RF-ReFacing®** может быть использован для придания лучшего контура обвисшей кожи внутренних поверхностей **предплечья** и **бедер**, а также **ягодиц**, **коленей**, **живота**.

Область применения:

Косметология
Дерматология
Пластическая хирургия

Технические характеристики:

Рабочая частота 2,2 МГц
Мощность от 1 до 50 Ватт

Перед тем, как использовать прибор RF-ReFacing® необходимо пройти обучение у наших специалистов.

Какие пациенты могут проходить лечение методом RF-ReFacing®?

Метод RF-ReFacing® может быть рекомендован пациентам любого возраста. Для молодых пациентов достаточно двух процедур с интервалом в один месяц. Более зрелым людям рекомендуется проводить процедуру от трех до пяти раз с интервалом в две-три недели. Количество процедур зависит от желаемого результата.

Ниже приведенный пример демонстрирует регенерацию кожи благодаря стимуляции радиоволнами. Необходимо объяснить пациенту, что в первые дни лечения эффект может быть слабо выражен. Результаты становятся видны через несколько дней. Регенерация кожи происходит постепенно в течение нескольких недель или месяцев в зависимости от возраста пациента и состояния его кожи.

Если пациент курит, употребляет алкоголь или наркотики, результат процедуры может быть менее выраженным по сравнению с пациентами, ведущими здоровый образ жизни и придерживающимися здоровой диеты.



Пациентка осталась полностью довольна после четырех сеансов терапии.

➤ Статистические результаты:

Основываясь на статистическом анализе, подводим итоги:

- В течение 2-4 недель 50% пациентов отмечают положительный результат
- Через 8-12 недель 50% пациентов оценивают результат терапии как хороший, а оставшиеся 50% - как очень хороший

